

Body - Healthy and Shaped

# MEZO BODY SYSTEM



- **ELEKTRO SKULPTURA**  
drenažna masaža  
tonifikacija  
tretman grudi  
redukcija celulita
- **ULTRAZVUČNA TERAPIJA**
- **MEZOPORACIJA**
- **VAKUUM TERAPIJA**

## OPCIJE:

- **KAVITACIJA**  
umesto ultrazvuka
- **PROSTIRKA SA DŽEPOVIMA ZA ODLAGANJE ELEKTRODA**  
(za komfornu primenu)





Šifra: 9827

## KONCEPT

Povezivanja ultrazvuka, mezoporacije i elektro preoblikovanja postoji zahvaljujući činjenici da ultrazvuk ima lipolitsko dejstvo bilo bi tačnije reći lipo-foretično, koje mobilise masnoće iz ćelija i odvodi u krv; stimuliše se kontrakcija mišića, naročito ako su stimulisana crvena mišićna vlakna, koristi masnoću da privuče energiju za kontrakciju, zatim troši masnoću koja cirkuliše, a koja bi se inače ponovo nagomilala.

## ELEKTRO SKULPTURA

je prijatan i efekatan tretman. On koristi novi oblik talasa koji omogućava tretman mišićnih vlakana na izuzetno delikatan način. Ova tehnologija proizvodi kontrakcije koje doprinose fiziološkom toniranju kože i tela, usporavajući formiranje naslaga celulita

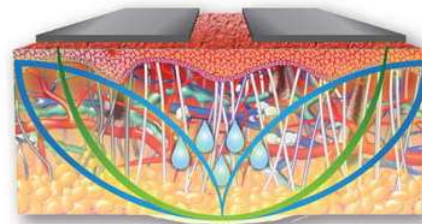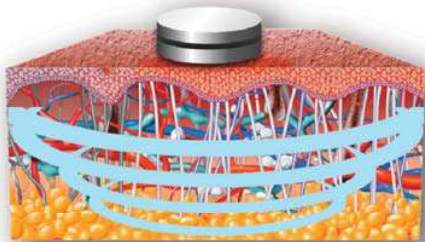


## ULTRA ZVUČNA TERAPIJA

Koristi se kao protivteža fibro-sklerotskim (stvrdnutim) komponentama celulita, povećavajući temperaturu i samim tim povećavajući brzinu metaboličkih reakcija masnih naslaga (i na taj način poboljšavajući dejstvo lipolize) i menjajući lokalnu pH vrednost i propustljivost ćelijskih membrana, zahvaljujući snažnim silama ubrzanja kojima se podvrgavaju čestice tkiva, sa prolaskom ultrazvučnog talasa.

## MEZOPORACIJA

Elektroporacija je tehnika za transdermalno nanošenje koja deluje direktno na ćelijske mehanizme putem električnih impulsa i vibracija proizvedenih od strane specijalnih dinamičkih struja, oblika talasa i frekvencija, koji otvaraju "kanale" u dermisu da bi se dubinski prenele odabrane supstance koje se nanose u zavisnosti od nepravilnosti koje se tretiraju.

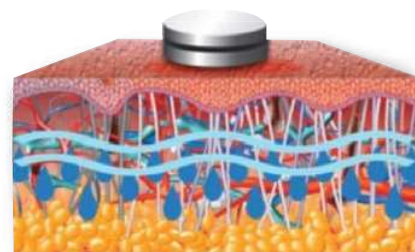

Vakuum motor: 12VDC  
Vakuum max.: 850mbar  
Pritisak max.: 7,2l pm  
Snaga motora: 28W na 12VDC

## VAKUM MASAŽA

Problemi nastali usled disbalansa vode u tkivima i limfne stagnacije mogu se efikasno tretirati programima serijske drenažne masaže.

### Elektroskulptura:

Maksimalna izlazna struja: 0-30mA AC  
Izlazna frekvencija: 10-200Hz  
Tajmer: 1-60min  
**OSNOVNA OPREMA**  
komplet kablova x 4 kom  
komplet traka-steznika  
(2 velike, 4 srednje, 4 male)  
gumeno grafitne elektrode x 16 kom  
navlake za elektrode x 16 kom

### Ultrazvuk:

Frekvencija: 1Mhz  
Izlazna snaga:  
0-1w/cm2 mala sonda  
0-2cm2 velika sonda  
Modalitet rada:  
Kontinualni  
Impulsni 25- 50 -75%

### Tehničke karakteristike:

ŠIFRA: 9827  
Napajanje: 220VAC 50/60Hz  
Kućište: Prohrom sa zaštitom  
Maksimalna snaga: 6VA  
Osigurač: 1A T  
Zaštitna klasa: I, BF  
Težina: 20kg  
Dimenzije: 620x370x1100mm