



GENERAL CATALOGUE
2020/2021

BEAUTY & WELLNESS EQUIPMENT PRO



ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • СЕРТИФИКАТ • CERTIFICADO • CERTIFICAT


Management Service

SERTIFIKAT

Sertifikaciono telo
TÜV SÜD Management Service GmbH
potvrđuje da je preduzeće

 **VECOM**
COSMETICS

VECOM BEAUTY SYSTEM DOO
Trg Kralja Aleksandra 2/2
SRB-18000 Niš

za oblast

Proizvodnja i prodaja kozmetičkih aparata

uveo sistem upravljanja kvalitetom i da ga primenjuje.
Proverom kvaliteta, izveštaj broj 70774221,
potvrđeno je da su ispunjeni zahtevi prema standardu

ISO 9001:2008

Ovaj sertifikat važi do 2014-01-02
Registracioni broj sertifikata 12 100 39947 TMS

 
München, 2011-01-04


0005-7534-200-01-02

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungs- und Regelwerks-DE • 60528 Wiesbaden • Germany





SADRŽAJ

EPIL & LASER PROGRAM 5

MULTIPLE EPIL H8	6
MULTIPLE EPIL PORTABLE LIGHT	8
3XD FUSION	10
3XC ALFA PORTABLE	12
EXTREME LIGHT	14
CARBON LIGHT 5XD	16
CRYSTAL LASER PORTABLE LIGHT	18

BODY PROGRAM 21

LIPOSLIM SYSTEM	22
ULTRA CONTOUR TOUCH	24
MEZO BODY SYSTEM	26
RWT POWER TECHNOLOGY	28
BEAUTY AIR MASSAGER	30
TERMO ČEBE	32
CAVITE STAR	33
CAVITE EXCLUSIVE	34
CAVITE PERFECT PORTABLE	36
RF DYNAMIC FACE & BODY	37
RF ENERGY FACE & BODY	38
RF BODY TOUCH UG	40
RF FACE BODY TOUCH UG	41
BODY MASTER	42
CELOS 12 C	43
ULTRASOUND DS FACE & BODY	44
VACUUM FACE & BODY	45

FACE PROGRAM 47

FACE CREATOR	50
FACE MODUL	52
DERMO OXY	54
RF FACE TOUCH UG	56
RF DYNAMIC FACE	57
MEZO RF LIFT	58

MEZO RF LIFT TOUCH UG	59
MEZO SKIN EP	60
FACE LIFT MASK	61
LIFTING M-BEAUTY	62
DEEP CLEAN	63
BIOLASER 100mW	64
DS FACE & BODY	64
ULTRASONIC SKIN SYSTEM	65
ULTRAPEEL & PDT LED	66
DARSONVAL AS	67
DARSONVAL PORTABL	68
JONOS AS 10	69
JONOS AS 30	70
JONOS - DARSONVAL	71
VAPOZON FM - 601	72
TERMO MASKA	73
KOZMETIČKA	75
LUPA HROM LUX	75
KOZMETIČKA LED LUPA	75
STALAK ZA KOZMETIČKU LUPU	75

WELLNESS & EQUIPMENT 77

WELLNESS EXCLUSIVE	78
WELLNESS EXCLUSIVE	79
WELLNESS OMNIA SPA	80
RELAX EXCLUSIVE	81
LEŽALJKA POOL CHAIRS	82
WELLNESS STOČIĆ DRVENI	83
MULTIEXCLUSIVE LEŽAJ	84
MULTIEXCLUSIVE LEŽAJ	85
LEŽAJ DVODELNI	86
ELEKTROPODESIVI	86
LEŽAJ TRODELNI 4D	87
LEŽAJ TRODELNI 4D	88
LEŽAJ DVODELNI 4D	89
STOLICA K 10	91
STOLICA K 11	91
STOLICA K 3	91

POLICA ZA MEZO APARATE	92
POLICA ZA IPL APARATE	92
STALAK ZA RF FACE & BODY	92
STALAK ZA BODY MASTER	93
METALNA POLICA 3D	93
METALNA POLICA 5D	93
POLICA SA FIOKOM	93
DEPY LADY 9L sa i bez stalka	94
DEPY LADY 5L	94
DEPY LADY TH8	94
DEPY LADY TH16	95
DEPY LADY 21	95
DEPY LIBERTY 800 ml	95
SUVI STERILIZATOR	96

PRATEĆA OPREMA 97

DIODE LASER POWER



3XD FUSION
DIODNI LASER 755+808+1064 nm


Šifra 6814



3XC ALFA PORTABL
DIODNI LASER 755+808+1064 nm

Šifra 6816

MULTIPLE EPIL

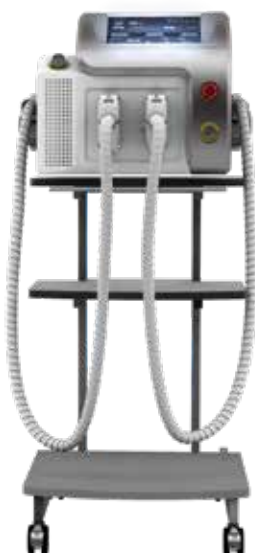

MULTIPLE EPIL H8
MULTIPLE EPIL sa dve sonde

Šifra 6915



MULTIPLE EPIL PORTABL LIGHT
MULTIPLE EPIL sa jednom sondom

Šifra 6914

EPIL & LASER PROGRAM

Aparati za epilaciju

ND YAG aparati

- TEHNOLOGIJA "U POKRETU"
- BEZBOLNO
- UGODNIJE NEGO VEĆINA PROIZVODA
- SKRAĆENO TRAJANJE TRETMANA
- SUPER SNAGA: 2000 W



APARATI ZA EPILACIJU **MULTIPLE EPIL H8**

Šifra 6915

SADRŽI 2 SISTEMA EPILACIJE: NOVU MULTIPLE EPIL I STANDARDNU IMPULSNU TEHNOLOGIJU

ŠTA JE MULTIPLE EPIL TEHNOLOGIJA?

MULTIPLE EPIL predstavlja tehnologiju za trajno odstranjivanje dlačica koja ima izuzetan uspeh. Ovaj sistem kombinuje lasersku tehnologiju i dobroti impulsnog svetla u postizanju praktično bezbolnih rezultata. Sada se čak mogu tretirati i dlačice koje je do sada bilo jako teško ili gotovo nemoguće odstraniti. Tehnologija „U pokretu“ predstavlja proboj na polju trajnog odstranjivanja dlačica svetlosnom tehnologijom. Tretman je ugodniji od konvencionalnih načina i koža je bolje zaštićena.

PRINCIP TRETMANA

Tehnologija "U Pokretu" predstavlja proboj na polju ugodnosti klijenta, brzine procedure i konstantnih kliničkih rezultata. Zašto? Ona omogućava postepeni porast temperature do željene temperature terapije, bez rizika od povrede i sa mnogo manje bola.

MULTIPLE EPIL H8

je jedinstven zato što njegov bezbolan proces radi u pokretu, sa inovativnom MULTIPLE EPIL tehnologijom i „brišućom“ tehnikom koja eliminiše problem promašenih ili preskočenih mesta na koži. Potpuna prekrivenost podrazumeva glatke noge, ruke, leđa i lice za sve vaše klijente – bez bola. U stvari, klijenti su iskustvo MULTIPLE EPIL tretmana uporedili sa umirujućom masažom vrelim kamenjem.

- > Epidermis ~ 25°C sa hlađenjem
- > Dermis ~ 45°C
- > Folikul dlake ~ 50°C za vreme MULTIPLE EPIL procedure
- > Poboľšana ručka novom lampom:
- > Normalna lampa: 100,000 otpusta
- > Lampa za Multiple Epil ručku: 500 000 otpusta

OTPUŠTANJE SVETLOSTI U 5 MOGUĆIH NAČINA RADA

- 3,4,5,6,10 otpusta u sekundi

MULTIPLE EPIL H8 je opremljen novom AFT tehnologijom (Napredna Fluorescentna Tehnologija) koja koristi nisku i ujednačenu energiju.



U ČEMU JE RAZLIKA IZMEĐU MULTIPLE EPIL I NORMALNOG IPL TRETMANA?

Parametar	Normalni IPL	Kombinovani tretman Multiple Epil	Prednosti
Način rada	Multi impulsni način	Jedno-impulsni način	Jedno-impulsni način rada emituje prosečnu energiju, dok multi-impulsni način rada fokusira energiju na prvi impuls, što lako može dovesti do opekotina
Talasna dužina	420-1200nm	640-950nm	Multiple epil je opremljen novom AFT tehnologijom, gde svaki impuls ima ujednačenu gustinu energije, bez bolova i neželjenih efekata
Zasebna ručka	Dostupna	Dostupna	Zasebna funkcija ručke omogućava jednostavan i siguran tretman
DEC Tehnologija	Dostupna	Dostupna	Obezbeđuje tačno i konstantno emitovanje energije i sve vreme ga prikazuje, što tretman čini jednostavnim i sigurnim.
Frekvencija	0.2-1HZ	1-10HZ	Frekvencija ubrzava tretman i skraćuje njegovo trajanje
Tehnologija rada	Statična tehnologija	Kombinovana tehnologija	Pokretna tehnologija koristi manje vremena za tretmane leđa, nogu i ruku

PREDNOSTI MULTIPLE EPIL H8 APARATA

- > Aparat kombinuje 2 metode: tehnologiju za brzo uklanjanje dlaka i tehnologiju impulsnog pulsirajućeg svetla
- > Koristi malu energiju sa velikim brojem pulseva u sekundi
- > Brz tretman, skraćuje vreme epilacije velikih površina (Butina, leđa, nogu)
- > Duže i sporije zagrevanje kože dovodi do boljih rezultata
- > Klasična tehnologija impulsnog pulsirajućeg svetla ima frekvenciju 0,2-1 Hz, dok aparat multiple epil h8 postiže 1-10 Hz, što značajno ubrzava tretman i štedi vreme
- > Definisani protokoli koji daju najefikasnije rezultate
- > Trajanje lampe: 500 000 fleševa

PROGRAMI IMPULSNE TEHNOLOGIJE

- ODSTRANJIVANJE DLAČICA
- PODMLAĐIVANJE KOŽE
- TERAPIJA PIGMENTACIJE
- TERAPIJA AKNI
- VASKULARNA TERAPIJA

PROGRAMI MULTIPLE EPIL TEHNOLOGIJE

- ODSTRANJIVANJE DLAČICA

PRATEĆA OPREMA



Šifra 3341



Šifra 309



Šifra 3382

PRIKAZ EKRANA



Tehničke specifikacije

Talasna dužina	640-950 nm
Brojač ručke	Da
Površina tretirane regije	15*50 mm ²
Energija	1~36 J/cm ² , 1~50 J/cm ²
Tajmer kontinuiranog otpusta	1-60 s
Učestalost otpuštanja impulsa	1-10 Hz
Impuls	Jedan
Pulsira na	2-20 ms
Displej	8,4" tač skrin u boji
Snaga	2000 W
Napajanje	220-230 V AC, 50/60 Hz
Broj sondi	2 (MULTIPLE EPIL sonda + sonda sa impulsnim pulsirajućim svetlom)
Sistem hlađenja	Vazdušno + sistem cirkulacije vode
Dimenzije aparata (dxšxv)	740 x 610 x 630 mm
Težina aparata	50 kg

- UKLANJANJE DLAKA
- PODMLAĐIVANJE KOŽE
- UKLANJANJE PIGMENATA
- UKLANJANJE AKNI
- ZATEZANJE KOŽE, LIFTING



APARATI ZA EPILACIJU

MULTIPLE EPIL PORTABLE LIGHT

Šifra 6914

MULTIPLE EPIL PORTABLE LIGHT JE APARAT KOJI SADRŽI 2 SISTEMA EPILACIJE: NOVU MULTIPLE EPIL- TEHNOLOGIJU U POKRETU I STANDARDNU TEHNOLOGIJU PULSIRAJUĆEG SVETLA

ŠTA JE MULTIPLE EPIL?

Metoda epilacije koja kombinuje tehnologiju za brzo uklanjanje dlaka sa intenzivnim impuls svetlom što praktično omogućava bezbolne tretmane.

- > "In-motion" tehnologija u pokretu
- > Manja energija sa efektivnijim rezultatima
- > Pouzdan i efikasan kod svih tipova kože
- > Bezbolan tretman
- > Prijatniji tretman zbog veće frekvencije
- > Super snaga 2000 W

PRINCIP TRETMANA

Tehnologija "U pokretu" predstavlja proboj na polju ugodnosti klijenta, brzine, procedure i konstantnih kliničkih rezultata. Zašto? Ona omogućava postepeni porast temperature do željene temperature terapije, bez rizika od povreda i sa mnogo manje bola.

MULTIPLE EPIL PORTABLE LIGHT je jedinstven zato što njegov bezbolan proces radi u pokretu, sa inovativnom MULTIPLE EPIL tehnologijom odn. „brišućom“ tehnikom koja eliminiše problem promašenih ili preskočenih mesta na koži. Potpuna prekrivenost podrazumeva glatke noge, ruke, leđa i lice za sve klijente, bez bola.

PRIMENA

- > UKLANJANJE DLAKA
- > PODMLAĐIVANJE KOŽE
- > UKLANJANJE PIGMENATA
- > UKLANJANJE AKNI
- > ZATEZANJE KOŽE, LIFTING

FUNKCIJE

MULTIPLE EPIL PORTABLE LIGHT sistem ima 4 glavne funkcije:

- > Omogućava operateru da izabere najbolje parametre za svog klijenta
- > Kontrolise radni proces sistema i sprečava poteškoće
- > Kontrolise energiju unutar sistema
- > Bira opseg tretmana

PRIKAZ EKRANA



PREDNOSTI

PREDNOSTI IMPULSNOG PULSIRAJUĆEG SVETLA:

- > Intenzivno pulsirajuće svetlo zbog velikog raspona spektra talasnih dužina, moguće je adaptirati talasnu dužinu prema boji kože, boji i debljini dlake klijenta
- > Zamenjivi filteri od 420 do 1200 nm
- > Bezbolna i ugodna metoda

PREDNOSTI TEHNOLOGIJE U POKRETU:

- > Epilacija velikih površina za kraće vreme
- > Niža temperature zagrevanja dlake od 42°C
- > Raspon talasne dužine od 690-1200 nm
- > Koristi nižu energiju sa većom učestalošću otpuštanja impulsa

PRATEĆA OPREMA



Šifra 3382



Šifra 309



Šifra 3341

Tehničke specifikacije

Talasna dužina	640-950 nm
Brojač ručke	Da
Površina tretirane regije	8*40 mm ² , 15*50 mm ²
Energija	1~36 J/cm ² , 1~50 J/cm ²
Tajmer kontinuiranog otpusta	1-60 s
Učestalost otpuštanja impulsa	1-10 Hz
Impuls	Jedan
Pulsira na	2-20 ms
Displej	8,4" tač skrin u boji
Snaga	2000 W
Napajanje	220-230 V AC, 50/60 Hz
Broj sondi	1 (Jedna sonda sa impulsnim pulsirajućim svetlom ili sonda za tehnologiju u pokretu)
Sistem hlađenja	Vazdušno + sistem cirkulacije vode
Dimenzije aparata (dxšxv)	740 x 610 x 630 mm
Težina aparata	50 kg



- EFEKTIVAN, BRZ I BEZBOLAN TRETMAN
- FOKUSIRAN NA DVA ASPEKTA: FUNKCIONALNOST I SIGURNOST
- ODGOVARA SVIM TIPOVIMA KOŽE I SVIM BOJAMA DLAKA, UKLJUČUJUĆI I OSUNČANU KOŽU
- POSEDUJE PODEŠAVANJE ZA 6 TIPOVA KOŽE
- TROSTRUKI SISTEM HLAĐENJA
- OMOGUĆAVA BRZU EPILACIJU VELIKIH POVRŠINA
- MODERAN DIZAJN I SMART SISTEM, KONTAKTNO HLAĐENJE I SAFIRSKI KRISTAL



Šifra 6814

APARATI ZA EPILACIJU

3XD FUSION

DIODNI LASER sa 3 talasne dužine
755/808/1064nm

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA PROGRESIVNIH LASERA

KAKO RADI?

Diodna laser tehnologija za epilaciju bazira se na odabranoj dinamici svetlosti i toplote. Laser prolazi kroz površinu kože da bi stigao do korena folikula dlake. Laserski aparat 3XD FUSION koristi tri talasne dužine: 755 nm / 808 nm / 1064 nm. Talasna dužina 808 nm je posebno efikasna na melanocite folikula dlake, bez oštećenja okolnog tkiva, jer se koherentno lasersko svetlo precizno usmerava. Stablo dlake i folikuli unutar melanina mogu apsorbovati laserski talas i pretvoriti u toplotu, tako povećavajući temperaturu samih folikula. DIODNI LASER 3XD FUSION sa tri talasne dužine istovremeno omogućava efektivno uklanjanje standardnih (808 nm - Diodni), zatim veoma svetlih (755 nm - Aleksandrit laser) i veoma tamnih i debelih dlaka (1064 nm Nd:yag).

PRINCIP TRETMANA

Trajna epilacija diodnim laserom se zasniva na selektivnoj dinamici svetlosti i zagrevanja. Laserski zrak prolazi kroz površinu kože i dopire do korena folikula dlake; svetlost se može apsorbovati i pretvoriti u toplotno oštećeno tkivo folikula dlake, tako da se predeo gubitka dlake regeneriše bez oštećenja okolnog tkiva. Blaga bol, laka procedura korišćenja, najbezbednija tehnologija za trajnu epilaciju.

PRIKAZ EKRANA



PREDNOSTI EPILACIJE SA 3 TALASNE DUŽINE

- Osmišljen tako da se može tretirati čak i veoma osetljiva koža, diodni laser sa tri talasne dužine svetlosti je pouzdano efikasan i preporučuje se za tretman na bilo kom delu tela.
- Bez obzira na kom se tipu kože primenjuje ostvaruju se maksimalni rezultati zbog njegovog kontrolisanog laserskog snopa.
- Diodni laser sa tri talasne dužine svetlosti je laser najnovije generacije koji poseduje uređaj za hlađenje koji umiruje kožu i epilaciju čini bezbolnom.
- Velika prednost ovog diodnog lasera je ta što se dlake posle tretmana sa njim redukuju na duži vremenski period za razliku od drugih tretmana epilacije.
- Njegova prednost je i ta što zbog velike gustine energije od 120J koju emituje omogućava redukovanje upornih, tankih i veoma svetlih dlaka.

REZULTATI

Rezultat laserske depilacije zavisi od fototipa, veličine i pigmentacije dlake, i od njene faze rasta na tretiranoj oblasti. Zadovoljavajućim rezultatima smatramo kada se posle 6 - 8 tretmana može videti 80% smanjenja neželjenih dlačica. Posle toga, možda će biti neophodno uraditi povremene popravke ali ovo zavisi od fiziološkog odgovora klijenta. Generalno govoreći, dlačice koje ne odreaguju u potpunosti pretvaraju se u tanko vlasište vidljivo samo pri osvetljenosti. Laserska epilacija ostavlja kožu mekanom i sjajnom.


SPECIFIČNOSTI 3XD

- površina sonde 3xd je 18x12 mm
- energija 3xd fusion je 120 J
- snaga aparata 2000 W
- snaga sonde 800 W
- sonda za 3xd je snage 800 W

PRATEĆA OPREMA



Šifra 3301

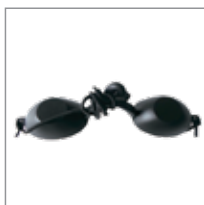


Šifra 3382



Šifra 309

DELOVANJE NA FOLIKUL DLAKE

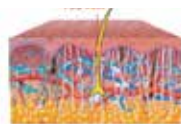

Aleksandrit laser
(svetle dlake, svetla koža)



Diodni laser (standardne
dlake, standardna koža)



Nd Yag laser (tamne
dlake, tamna koža)

Tehničke specifikacije

Tip lasera:	Diodni laser sa tri talasne dužine
Talasna dužina lasera:	755 nm / 808 nm / 1064 nm
Tačka laserske obrade:	12 x 18 mm
Veličina LCD ekrana:	10,4 inča
Trajanje impulsa:	5 - 400 ms (podesivo)
Gustina energije:	1 - 120 J/cm ²
Frekvencija impulsa:	0,5 - 12 Hz
Sistem hlađenja:	Hlađenje u zatvorenom ciklusu, kontaktno hlađenje glave lasera je 0 - 5°C
Napajanje	220-230 V AC, 50/60 Hz
Snaga aparata:	2000 W
Garancija sonde:	3.000.000 fleševa
Težina:	88 kg
Dimenzije (d×š×v):	600 mm × 510 mm × 1220 mm



- ODGOVARA SVIM TIPOVIMA KOŽE I SVIM BOJAMA DLAKA, UKLJUČUJUĆI I OSUNČANU KOŽU
- POSEDUJE PODEŠAVANJE ZA 6 TIPOVA KOŽE
- TROSTRUKI SISTEM HLAĐENJA
- OMOGUĆAVA BRZU EPILACIJU VELIKIH POVRŠINA



APARATI ZA EPILACIJU

3XC ALFA PORTABLE

DIODNI LASER 755+808+1064nm

Šifra 6816

KAKO RADI?

Diodna laser tehnologija za depilaciju bazira se na odabranoj dinamici svetlosti i toplote. Laser prolazi kroz površinu kože da bi stigao do korena folikula dlake. Laserski aparat 3XC ALFA PORTABLE koristi tri talasne dužine: 755 nm / 808 nm / 1064 nm. Talasna dužina 808 nm je posebno efektivna na melanocite folikula dlake, bez oštećenja okolnog tkiva, jer se koherentno lasersko svetlo precizno usmerava. Stablo dlake i folikuli unutar melanina mogu apsorbovati laserski talas i pretvoren u toplotu, na taj način povećavajući temperaturu samih folikula. DIODNI LASER 3XC ALFA PORTABLE sa tri talasne dužine istovremeno omogućava efektivno uklanjanje standardnih (808 nm - Diodni), zatim veoma svetlih (755 nm - Aleksandrit laser) i veoma tamnih i debelih dlaka (1064 nm Nd:yag).

PRINCIP TRETMANA

Trajna epilacija diodnim laserom se zasniva na selektivnoj dinamici svetlosti i zagrevanja. Laserski zrak prolazi kroz površinu kože i dopire do korena folikula dlake; svetlost se može apsorbovati i pretvoriti u toplotno oštećeno tkivo folikula dlake, tako da se predeo gubitka dlake regeneriše bez oštećenja okolnog tkiva. Blaga bol, laka procedura korišćenja, najbezbednija tehnologija za trajnu epilaciju.

REZULTATI

Rezultat laserske depilacije zavisi od fototipa, veličine i pigmentacije dlake, i od njene faze rasta na tretiranoj oblasti. Zadovoljavajućim rezultatima smatramo kada se posle 6 - 8 tretmana može videti 80% smanjenja neželjenih dlačica. Posle toga, možda će biti neophodno uraditi povremene popravke ali ovo zavisi od fiziološkog odgovora klijenta. Generalno govoreći, dlačice koje ne odreaguju u potpunosti pretvaraju se u tanko vlasište vidljivo samo pri osvetljenosti. Laserska depilacija ostavlja kožu mekanom i sjajnom.

PRIKAZ EKRANA





PREDNOSTI EPILACIJE SA 3 TALASNE DUŽINE

- > Osmišljen tako da se može tretirati čak i veoma osetljiva koža, diodni laser sa tri talasne dužine svetlosti je pouzdano efikasan i preporučuje se za tretman na bilo kom delu tela.
- > Bez obzira na kom se tipu kože primenjuje ostvaruju se maksimalni rezultati zbog njegovog kontrolisanog laserskog snopa.
- > Diodni laser sa tri talasne dužine svetlosti je laser najnovije generacije koji poseduje uređaj za hlađenje koji umiruje kožu i epilaciju čini bezbolnom.
- > Velika prednost ovog diodnog lasera je ta što se dlake posle tretmana sa njim redukuju na duži vremenski period za razliku od drugih tretmana epilacije.
- > Njegova prednost je i ta što zbog velike gustine energije koju emituje omogućava redukovanje upornih dlaka, tankih dlaka i veoma svetlih dlaka.
- > Omogućava vam da pregledate slike, programe, podatke o klijentima, izbor odgovarajućih parametara za sve tipove kože i dlake.

SPECIFIČNOSTI 3XC ALFA PORTABLE

- > Velika gustina energije od 105 J omogućava uklanjanje svih boja i debljina dlaka
- > Kontaktno hlađenje ručice je 0-50°C sa 2 sistema zatvorenog hlađenja što omogućava postojanu epilaciju koja umiruje kožu
- > Snaga aparata je 2000 W
- > Garancija sonde: 3.000.000 fleševa
- > Posедује podešavanje za 6 tipova kože

Tehničke specifikacije

Tip lasera:	Diodni laser sa tri talasne dužine
Talasna dužina lasera:	755 nm / 808 nm / 1064 nm
Dimenzija glave sonde:	12 x 12 mm
Ekran	10,4 inča LCD Touch screen u boji
Trajanje impulsa:	5 - 400 ms (podesivo)
Energija:	1 – 105 J/cm ²
Frekvencija impulsa:	1 – 10 Hz
Sistem hlađenja:	Hlađenje u zatvorenom ciklusu, kontaktno hlađenje glave lasera je 0 – 5°C
Napajanje:	220-230 V AC, 50/60 Hz
Snaga aparata:	2000 W
Snaga laser bara:	500 W
Težina	50 kg
Dimenzije (dxšxv):	740 x 610 x 630 mm

PRATEĆA OPREMA



Šifra 3382



Šifra 309



Šifra 3302

- BEZBEDAN TRETMAN
- ODGOVARA SVIM TIPOVIMA KOŽE
- APSORBOVANJE SNOPI U PIGMENTU FOLIKULA
- MODERAN LCD DIZAJN SOFTVERA
- INTELIGENTNI SISTEM



APARATI ZA EPILACIJU **EXTREME LIGHT**

APARAT ZA TRAJNU EPILACIJU
DIODNOM LASER TEHNOLOGIJOM

Šifra: 6813

KAKO RADI?

Diodna laser tehnologija za depilaciju bazira se na odabranoj dinamici svetlosti i toplote. Laser prolazi kroz površinu kože da bi stigao do korena folikula dlake. Laserski aparat VECOM koristi talasnu dužinu od 808 nm, posebno efektivnu na melanocite folikula dlake, bez oštećenja okolnog tkiva, jer se koherentno lasersko svetlo precizno usmerava. Stablo dlake i folikuli unutar melanina mogu apsorbovati laserski talas i pretvoren u toplotu, na taj način povećavajući temperaturu samih folikula. Vrlo je važno da operator dobro poznaje lasersku tehnologiju, jer postoji mogućnost rizika i komplikacija.

TEORIJA TRETMANA

Trajna epilacija diodnim laserom se zasniva na selektivnoj dinamici svetlosti i zagrevanja. Laserski zrak prolazi kroz površinu kože i dopire do korena folikula dlake; svetlost se može apsorbovati i pretvoriti u toplotno oštećeno tkivo folikula dlake, tako da se predeo gubitka dlake regeneriše bez oštećenja okolnog tkiva. Blaga bol, laka procedura korišćenja, najbezbednija tehnologija za trajnu epilaciju.

REZULTATI TRETMANA APARATOM EXTREME LIGHT

Rezultat laserske epilacije zavisi od fototipa, veličine i pigmentacije dlake, i od njene faze rasta na tretiranoj oblasti. Zadovoljavajućim rezultatima smatramo kada se posle 6 - 8 tretmana može videti 80% smanjenja neželjenih dlačica. Posle toga, možda će biti neophodno uraditi povremene popravke ali ovo zavisi od fiziološkog odgovora klijenta. Generalno govoreći, dlačice koje ne odreaguju u potpunosti pretvaraju se u tanko vlasište vidljivo samo pri osvetljenosti. Laserska epilacija ostavlja kožu mekanom i sjajnom.

PRIKAZ EKRANA



ZBOG ČEGA JE POTREBNO PONAVLJATI TRETMANE?

Dlake našeg tela ne rastu istovremeno i rastu po određenim fazama: faza mirovanja i faza rasta. U isto vreme na našem telu u fazi rasta se može naći 70 do 90% dlaka, dok su ostale u fazi mirovanja. Obzirom da laserski snop može ukloniti dlaku samo ukoliko je u fazi rasta, prvim tretmanom se može uništiti samo određeni procenat dlaka. Iz tog razloga postoji i pauza između tretmana kako bi se preostaloj dlaci omogućio rast i priprema za naredni laserski tretman.

PREDNOSTI

- > Diodni laser efektivno i bezbedno deluje na sve tipove kože, uključujući preplanulu kožu, kao i veliki opseg boja, širine i dubine dlaka
- > Velika površina tretmana
- > Bezbedan i brz tretman
- > Lampa lasera izrađena u Nemačkoj, dugotrajna sa stabilnim učinkom
- > Safirski kristal, kontaktno hlađenje, skroz bezbolno
- > Odgovara svim tipovima dlaka, široko rasprostranjeno kao „Zlatni standard“ za trajnu epilaciju
- > Sistem kalibracije energije

PRATEĆA OPREMA



Šifra 3382



Šifra 3303

Tehničke specifikacije

Izvor svetlosti	Diodni laser
Sistem displeja	Mikrokompjuterski "touch screen" u boji
Tip lasera	Diodni laser visoke snage
LCD ekran	8,4" (inča) ekran sa 24 boje multi "touch screen"
Talasna dužina	808 nm
Protok	120 J/cm ² ili 180 J/cm ²
Trajanje impulsa	5-400 ms podesivo (5-1500 ms opciono)
Frekvencija impulsa	1-10 Hz (0,5-20 Hz opciono)
Površina tretmana	12x12 mm
Sistem hlađenja	Safirno kontaktno hlađenje + vazduh + poluprovodnik
Temperatura kristala	0-5°C
Napajanje	AC230V/110V 50-60Hz
Dimenzije aparata (dxšxv):	740x610x630 mm
Težina aparata:	50 kg



- UKLANJANJE SVIH BOJA I VRSTA TETOVAŽA
- UKLANJANJE TRAJNE ŠMINKE
- PODMLAĐIVANJE- TRETMAN CRNA LUTKA
- UKLANJANJE GLJIVICA SA NOKTIJU
- TRETMAN PROŠIRENIH KAPILARA



ND YAG APARATI

CARBON LIGHT 5XD

SA DVE TALASNE DUŽINE 1064/532 nm

Šifra: 6825

KAKO RADI?

ND YAG laser tehnologija bazira se na odabranom stepenu talasne dužine i snage lasera. Laser prolazi kroz površinu kože, pogađajući ciljano pigment, bez oštećenja okolnog tkiva, jer se lasersko svetlo precizno usmerava. Razložen pigment se resorbuje kroz limfni sistem.

SPECIFIČNOSTI APARATA

- Ručica aparata ima 2 nastavka: 532 nm i 1064 nm
- 1064 nm - za tretmane crnih i plavih pigmenta
- 532 nm - za tretmane crvenih i braon pigmenta
- Vrsta tretmana: kozmetički i profesionalni programi
- Kozmetički programi: tetovaže crne, plave, braon, crvene, ljubičaste, narandžaste, trajna šminka oko očiju, obrve, pege, pigmentacije, podmlađivanje - soft piling i karbon ili holivudski piling, gljivice noktiju.
- Profesionalni programi: vaskularna oštećenja (prošireni kapilari krvnih sudova), starosne pege, pege od sunca.
- Napredni sistem hlađenja: vodeno i vazdušno
- 532 fokusi (površine tretiranja) od 1-5 mm
- 1064 fokus (površine tretiranja) od 1-5 mm i fokus 7 mm



1064nm otklanja
CRNE I PLAVE TETOVAŽE



532nm otklanja CRVENE, ROZE,
LJUBIČASTE I BRAON TETOVAŽE

PREDNOSTI APARATA

- Fokusranja svetlost od 1-5mm za precizne linije
- Mogućnost primene 2 talasne dužine za različite vrste i boje tetovaža
- Izbor 8 programa sa podešenim parametrima za preporučene indikacije
- Fokusrani i usmereni laserski snop sa ciljanim delovanjem na promenu, bez oštećenja okolnog tkiva
- Tretman je skoro bezbolan i omogućava odlične rezultate
- Snaga ručice: 800 W
- Energija aparata: 2400 J
- Garancija ručice: 3.000.000 fleševa





PRATEĆA OPREMA



Šifra 3200



Šifra 3201



Šifra 3202



Šifra 3203



Šifra 309



Šifra 3382

Tehničke specifikacije

Tip aparata:	PORTABL Q-SWITCHED ND YAG LASER 1064 i 532 nm
Talasna dužina:	1064 i 532 nm
Nastavci	Ø7 YAG, sa podešavajućim fokusom sočiva i nastavkom 7 mm za podmlađivanje
Tretmani:	Uklanjanje tetovaža, podmlađivanje
Veličina glave za tretman:	1-5 mm
Širina impulsa:	<10 ns (jedan impuls)
Monitor	8" touch screen u boji
Energija:	0-2400 mJ (532 nm: 1200 mJ, 1064nm: 2400 mJ)
Frekvencija:	1-10 Hz
Snaga:	800 W
Hlađenje	Vazdušno i sistem kruženja vode
Životni vek laserskog štapa:	3.000.000 udara (maks. do 6.000.000 udara)
Režim rada:	220-240 V AC; 50/60 Hz
Dimenzije aparata (dxšxv):	530x400x390 mm
Težina aparata:	25 kg

- UKLANJANJE SVIH BOJA I VRSTA TETOVAŽA
- UKLANJANJE TRAJNE ŠMINKE
- PODMLAĐIVANJE- TRETMAN CRNA LUTKA
- UKLANJANJE GLJIVICA SA NOKTIJU



ND YAG APARATI

CRYSTAL LASER PORTABLE LIGHT

SA 3 TALASNE DUŽINE :

1064 I 532 nm ZA UKLANJANJE TETOVAŽA,

1320 nm ZA PODMLAĐIVANJE KOŽE

Šifra: 6820

KAKO RADI?

ND YAG laser tehnologija bazira se na odabranom stepenu talasne dužine i snage lasera. Laser prolazi kroz površinu kože, pogađajući ciljano pigment, bez oštećenja okolnog tkiva, jer se lasersko svetlo precizno usmerava. Razložen pigment se resorbuje kroz limfni sistem.

PO ČEMU SE IZDVAJA?

- › Stabilan, pouzdan i jak laser
- › Nema neželjenih efekata
- › Tri vrste nastavaka za uklanjanje svih boja i tipova tetovaža
- › Nema oštećenja okolnog tkiva
- › Dvostruki sistem hlađenja: vodeni i vazdušni

SPECIFIČNOSTI APARATA

- › Ručica aparata ima 3 nastavka: 532, 1064 i 1320 nm:
1064 nm za tretmane crnih i plavih pigmenta
532 nm za tretmane crvenih i braon pigmenta
1320 nm za podmlađivanje
- › Mogućnost primene 2 talasne dužine za različite vrste i boje tetovaže
- › Fokusrani i usmereni laserski snop sa ciljanim delovanjem, bez oštećenja okolnog tkiva
- › Tretman je skoro bezbolan i daje odlične rezultate
- › Garancija 150.000 fleševa ručice
- › 1064 nm menja energiju od 360 do 2400 mJ
- › 532 nm menja energiju od 180-1200 mJ

JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA





PRATEĆA OPREMA



Šifra 3382



Šifra 309

Tehničke specifikacije

Tip lasera	Q SWITCHED ND:YAG LASER
Talasna dužina	1064 nm i 532 nm, 1320 nm (podmlađivanje)
Snaga	500 W
Energija	0-1200 mJ 0-400 mJ
Širina impulsa	<10 ns
Frekvencija ponavljanja	1, 2, 3, 4, 5, 6 Hz
Način emitovanja svetlosti	Direktan izlaz laserskog snopa
Veličina tačke udara	1 - 7 mm
Ekran	7,4" LCD touch ekran u boji
Sistem hlađenja	Sistem kruženja vode + vazduh
Režim rada	220-240 V AC, 50/60 Hz
Dimenzije	320x380x370 mm
Težina	19 kg

BODY PROGRAM



LIPOSLIM SYSTEM

Šifra 9050



ULTRA CONTOUR TOUCH

Šifra 8111



RWT POWER TECHNOLOGY

Šifra 9057



RF BODY TOUCH

Šifra 9879

BODY PROGRAM

Elektro skulptura

Ultrazvučna lipoliza

Mezoporacija

Radiotalasni tretmani

Radikalni udarni talasi

- ULTRA LIPOSLIM
- LIPO MASSAGE
- RF ENERGY



APARATI ZA TELO **LIPOSLIM SYSTEM**

Šifra: 9050

*NAPREDNI SISTEM U BORBI PROTIV ZNAKOVA CELULITA, OPUŠTENE KOŽE
SA NASLAGAMA, SA TRI EFIKASNE TEHNOLOGIJE ZA MRŠAVLJENJE*

ULTRA LIPOSLIM, LIPO MASAŽA I RF ENERGY

Povezivanje lipolize, limfne drenaže i radiotalasnog delovanja jedno je od najboljih i najmoćnijih sadejstava u borbi protiv lokalizovanih masnih naslaga i celulita zato što niskofrekventni ultrazvuk deluje dobro na ćelije masti, drenažna masaža uglavnom na tečnu komponentu i mikrocirkulaciju, RF energy na proizvodnju kolagena i zatezanje: oni zajedno deluju na sve komponente celulita sa uspešnim sadejstvom.

ULTRA LIPOSLIM

Niskofrekventni ultrazvuk promenom frekvencije i dubine delovanja talasa kao i snage, može da deluje u različitim slojevima hipodermisa, podstičući ćelijsku razmenu i lokalno sagorevanje masnih naslaga. Ovo dejstvo reaktivira oblasti gde se masne naslage nagomilavaju (bokovi, abdomen, kolena, butine) i nezamenljiva je za revitalizaciju oblasti zahvaćenih masnim naslagama i celulitom gde krv ne cirkuliše pravilno.

LIPO MASSAGE

Drenažna masaža dejstvuje putem toniranja i drenaže, poboljšavajući elastičnost mišića i tkiva, i omogućavajući eliminaciju suvišnih tečnosti i toksina. Novi oblik masaže kombinuje površinsko i dubinsko delovanje na tkiva i čini drenažnu masažu efektom i prijatnom.

Sama lipo masaža stimulatивно deluje na limfu i dovodi do njenog boljeg protoka. Zato je program limfne drenaže obavezan nakon tretmana Ultra liposlim.



RF ENERGY

RF Energy predstavlja program primene radio frekvencije u cilju zatezanja i poravnanja teksture kože.

Dijatermija zagreva masne naslage i potkožno tkivo u oblastima koje se tretiraju na kontrolisan i bezbedan način. Ona dovodi do vazodilatacije i do povećanja količine kiseonika koji se doprema do tkiva i ubrzava metabolizam stimulišući proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, i ima relaksirajući i tonirajući efekat na tkivo.

PREDNOSTI

Prednosti povezivanja ultra liposlima, lipomasaže i rf elektro-preoblikovanja postoje zahvaljujući činjenici da ultra liposlim ima lipolitsko dejstvo (ili tačnije lipo-foretično) koje mobiliše masnoće iz ćelija i odvodi u krv, stimuliše se bolji protok, zatim troši masnoću koja cirkuliše, a koja bi se inače ponovo nagomilala i utiče na proizvodnju kolagena, elastina što sveukupno daje nov remodeliran izgled kože.

PRIKAZ EKRANA



PRATEĆA OPREMA



Šifra 9063

Šifra 5053/1

Šifra 8090



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: LIPOSLIM SYSTEM

Šifra: 9050

Režim rada: 220V AC; 50/60 Hz

Snaga aparata: 180 W

Osigurač: T-2 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF

Broj sondi: 3

Dimenzije ekrana: 10,2"

Broj programa: 12

Liposlim – ultrazvučna kavitacija

Izvor energije: Piezokeramički pretvarač

Nominalna frekvencija: 40 KHz

Lipo massage - vakuum

Vakuum max: 850 mBar

Pritisak max: 2,5 Bar

Protok: 7,2 Lpm

Vakuum motor: 12 V DC

Snaga motora: 28 W

RF energy – radiotalasni lifting

Izvor energije: Radiofrekvencija

Dimenzije aparata (dxšxv): 410x400x1280 mm

Težina aparata: 20 kg

- ELEKTROLIPOLIZA
- ELEKTROSKULPTURA
- DRENAŽNA MASAŽA
- PDS – PHOTO DYNAMIC SYSTEM



APARATI ZA TELO

ULTRA CONTOUR TOUCH

SINERGIJA SISTEMA
SA ULTRA CONTOUR-OM

Šifra: 8111

CELULIT, GOJAZNOST, OPUŠTENA I STARA KOŽA POSTAJU OPTEREĆENJE ZA HILJADE LJUDI DNEVNO. OVI PROBLEMI MOGU IZAZVATI MNOŠTVO NESAVRŠENOSTI, KOJE JE POTREBNO REŠAVATI SA CILJANIM PROCEDURAMA I NA STRUČAN NAČIN.

PDS – PHOTO DYNAMIC SYSTEM i ELEKTROLIPOLIZA – SINERGIJA

Povezivanje FOTO zraka i elektrolipolize jedna je od najboljih i najmoćnijih sadejstava u borbi protiv lokalizovanih masnih naslaga i celulita zato što su FOTO zraci jedan od najboljih načina prenosa toplote. Deluju tako što povećavajući temperaturu i enzimsku aktivnost, koja stimuliše lokalnu lipolizu, razbijaju naslage triglicerida na masne kiseline i glicerol koji zatim odlaze u krvotok da bi se kontrakcijom mišića metabolizovali i utrošili kao izvor energije. Elektrolipoliza deluje na masne naslage ali uglavnom na tečnu komponentu i mikrocirkulaciju. Oni zajedno deluju na sve komponente celulita sa uspešnim sadejstvom.

ELEKTRO – SKULPTURA

Elektro-skulptura je prijatan i efektan tretman. On koristi novi oblik talasa koji omogućava tretman mišićnih vlakana na izuzetno delikatan način. Ova tehnologija proizvodi kontrakcije koje doprinose fiziološkom toniranju kože i tela, usporavajući formiranje naslaga celulita.

ELEKTROLIPOLIZA

Elektrolipoliza je tehnika koja obrađuje problem celulita na ciljan način. Ona ima tonirajuće i stimulišuće dejstvo, pomaže smanjivanje naslaga celulita, zato pospešuje lokalizovanu cirkulaciju tako što povećava metaboličke zahteve ćelija rezultirajući potrošnjom masti.

DRENAŽNA MASAŽA

Drenažna masaža dejstvuje zahvaljujući mešavini stimulišućih struja sa dejstvom toniranja i drenaže, poboljšavajući elastičnost mišića i tkiva i omogućavajući eliminaciju suvišnih tečnosti i toksina. Novi oblik talasa, proizveden u firmi VECOM, čini drenažnu masažu efektom i prijatnom.

PDS – PHOTO DYNAMIC ZRACI

Foto-biološko zračenje podstiče toplotu samo kada dospe do potkožnih masnih tkiva, povećavajući njihovu temperaturu i ujedno i njihovu enzimsku aktivnost koja pokreće lokalnu lipolizu, razbijajući naslage triglicerida na masne kiseline i glicerol koji zatim odlaze u krvotok da bi se kontrakcijom mišića metabolizovali i utrošili kao izvor energije.

PROGRAMSKI PARAMETRI

MIN – vreme dejstva – predstavlja dužinu trajanja svake pojedinačne serije impulsa

Hz – frekvencija – visoke frekvencije (80-120 Hz) predstavljaju površinsku masažu, dok niske frekvencije (30-70 Hz) predstavljaju dublju masažu

IMP – dužina trajanja impulsa

VREME PAUZE – vreme trajanja pauze između kraja serije impulsa i početka nove, tj. za vreme koga se mišići odmaraju

WAVE – modulacije oblika talasa – nekoliko modulacija oblika talasa omogućavaju da se tkiva tretiraju na različite načine

MIN.	Hz	IMP.	PAU.	WAVE
10	120	--	--	
10	80	--	--	
10	70	--	--	
10	30	--	--	



Specifična lipolitska funkcija – Tonirajuća lipolitska funkcija



Drenažna lipolitska funkcija



Progresivna stimulacija 1 – blaga, zagrevajuća masaža koja se preporučuje u prvim fazama tretmana



Progresivna stimulacija 2 – blaga masaža, koja se preporučuje za trenirane mišiće i za glavne faze radnog kruga.



Aktivna stimulacija – blaga masaža, koja se preporučuje za trenirane mišiće i za glavne faze radnog kruga.



Energična stimulacija – energična masaža koja se preporučuje za dobro trenirane mišiće i za završne faze radnog kruga

TOUCH SCREEN

Omogućava izbor programa, pregled rasporeda postavljanja elektroda u okviru svakog programa, intenzitet svakog kanala, izabrani program, vreme tretmana, trenutnu fazu, izbor jezika, proveru broja radnih sati i druge parametre.

KATEGORIJE TRETMANA



PROGRAMSKE PROCEDURE



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: ULTRA CONTOUR TOUCH

Šifra aparata: 8111

Napajanje: 220-230 V AC, 50/60 Hz

Snaga: 220 W

Osigurač: T-2 A x 2

Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF

Broj sondi: 8

Broj elektroda: 16

Oblik impulsa: pravougli, trapezoidni

Vrsta talasa: elektromasažni, mikrostimulacija

Vrsta struje: impulsne mikrostimulacija

Broj programa: 18

Dimenzije ekrana: 10,2"

Modulacija impulsa: frekvencija 1-180 Hz

Dimenzije aparata (dxšxv): 420x370x1240 mm

Težina: 20 kg

- ELEKTRO SKULPTURA
 - > drenažna masaža
 - > tonifikacija
 - > tretman grudi
 - > redukcija celulita
- ULTRAZVUČNI TRETMAN
- MEZOPORACIJA
- VAKUUM TERAPIJA

APARATI ZA TELO

MEZO BODY SYSTEM

POVEZANE METODE OBLIKOVANJA TELA



Šifra: 9827

KONCEPT povezivanja ultrazvuka, mezoporacije i elektro preoblikovanja postoji zahvaljujući činjenici da ultrazvuk ima lipolitsko dejstvo, elektroimpulsima se stimuliše kontrakcija mišića, naročito ako su stimulisana crvena mišićna vlakna, koristi masnoću da privuče energiju za kontrakciju, zatim troši masnoću koja cirkuliše, a koja bi se inače ponovo nagomilala.

ELEKTRO-SKULPTURA je prijatan i efektan tretman. On koristi novi oblik talasa koji omogućava tretman mišićnih vlakana na izuzetno delikatan način. Ova tehnologija proizvodi kontrakcije koje doprinose fiziološkom toniranju kože i tela, usporavajući formiranje naslaga celulita.

ULTRAZVUČNA TERAPIJA – Koristi se kao protivteža fibro-sklerotskim (stvrdnutim) komponentama celulita, povećavajući temperaturu i samim tim povećavajući brzinu metaboličkih reakcija masnih naslaga (i na taj način poboljšavajući dejstvo lipolize) i menjajući lokalnu pH vrednost i propustljivost ćelijskih membrana, zahvaljujući snažnim silama ubrzanja kojima se podvrgavaju čestice tkiva, sa prolaskom ultrazvučnog talasa.

MEZOPORACIJA – Elektroporacija je tehnika za transdermalno nanošenje koja deluje direktno na ćelijske mehanizme putem električnih impulsa i vibracija proizvedenih od strane specijalnih dinamičkih struja, oblika talasa i frekvencija, koji otvaraju "kanale" u dermisu da bi se dubinski prenele odabrane supstance koje se nanose u zavisnosti od nepravilnosti koje se tretiraju.


VAKUUM MASAŽA – Problemi nastali usled disbalansa vode u tkivima i limfne stagnacije mogu se efikasno tretirati programima serijske drenažne masaže.



DELOVANJE FUNKCIJA NA TKIVO



Elektro skulptura

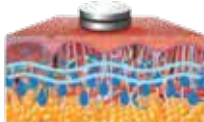

Mezoporacija



Ultrazvučni tretman

PRATEČA OPREMA



Prostirka sa džepovima za odlaganje elektroda (opcija)
Šifra 8108/3



Komplet steznika

Šifra 9075



Šifra: 0019



Šifra: 5053/1



Šifra: 9088

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: MEZO BODY SYSTEM

Šifra aparata: 9827

Režim rada: 220-230 V AC; 50/60 Hz

Snaga: 150 W

Osigurač: T-2 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Dimenzije displeja: 146x62,5 mm

Broj programa: 12

Elektroskulptura:

Maksimalna izlazna struja: 0-30 mA AC

Izlazna frekvencija: 10-200 Hz

Tajmer: 1-60 min

Ultrazvuk:

Frekvencija: 1 MHz

Izlazna snaga: 0-2 W/cm²

Modalitet rada: kontinualni / impulsni 25 – 50 – 75%

Veličina sonde: 24 cm²

Mezoporacija:

Oblik impulsa: četvrtasti, 500 mS

Vakuum:

Vakuum motor: 12 V DC

Vakuum max.: 850 mBar

Pritisak max.: 7,2 Lpm

Snaga motora: 28 W na 12 V DC

Kućiste: polistirol

Dimenzije: 620x370x1100 mm

Težina: 25 kg

- TRETMANI CELULITA
- OBLIKOVANJE TELA
- UČVRŠĆIVANJE TKIVA
- ELIMINACIJA LIMFNOG ZASTOJA



Šifra: 9057

APARATI ZA TELO

RWT POWER TECHNOLOGY

RADIJALNI UDARNI TALASI

PREOBLIKOVANO TELO, TONIRANA, KOMPAKTNA, HIDRIRANA I REGENERISANA KOŽA, JER SU DOBAR IZGLED I DOBAR OSEĆAJ NEOPHODNI

RADIJALNI UDARNI TALASI – SNAGA KOMPRIMOVANOG VAZDUHA

RWT akustični udarni talasi koristi svojstva udarnih talasa u borbi protiv znakova celulita, opušteno kožu sa naslagama, obmotavajući klijenta u osećaj prijatne masaže. RWT POWER TECHNOLOGY radi sa naprednom tehnologijom za mršavljenje koja se može koristiti zasebno ili u sadejstvu sa drugim metodama.

Terapija akustičnim talasima koristi kinetičku energiju, koja se posebnom tehnologijom pretvara u akustični (zvučni) talas velikog pritiska za tretiranje dva najveća uzroka celulita. Akustični talas deluje na fibrozu vezivnog tkiva oko koje se gomilaju masne naslage i na probijanje masnoće u donje slojeve kože. Snažnim vibracijama koje razvija u tkivu, uspeva da dovede do opuštanja stvrdnutih vezivnih pregrada, čime se oslobadjaju zarobljene masti, voda i toksini. Dragoceno dejstvo akustičnih talasa ogleda se u povećanju protoka krvi kroz tretirano područje i **stvaranju novih lanaca kolagena**, koji grade novo, kvalitetno elastično vezivno tkivo. Zbog toga koža postaje čvršća, gladja i zategnutija. U 90% slučajeva povećanje elastičnosti kože traje i do tri meseca nakon što se završi sa tretmanom.

KOZMETIČKI TRETMANI

- > TRETMANI CELULITA
- > OBLIKOVANJE TELA
- > UČVRŠĆIVANJE TKIVA
- > ELIMINACIJA LIMFNOG ZASTOJA

KAO KONAČAN REZULTAT DOBIJA SE

- > Učvršćivanje vezivnog tkiva i poboljšanje mikrocirkulacije
- > Gubitak masnih ćelija i smanjenje u obimu
- > Zategnutija i podmlađena koža sa reoblikovanim izgledom nove figure

VAŽNO JE NAGLASITI


- > Ovo je jedini dugotrajni metod u borbi protiv celulita
- > Tokom tretmana nije neophodno menjati režim ishrane, kao ni kombinaciju bilo kakvih anticelulit metoda





PRE RWT TRETMANA

Uvećane masne ćelije vrše pritisak prema površini kože. Koža je sa tipičnim izgledom pomorandžine kore. Vlakna vezivnog tkiva nisu elastična i ne protežu se zbog masti koja ih okružuje. To daje koži karakterističan izgled dušeka. Lokalna cirkulacija krvi se drastično smanjuje.

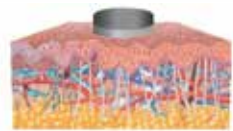

TOKOM TRETMANA RWT

Akustični talasi visoke frekvencije su uvedeni u telo. To izaziva opuštanje vezivnog tkiva, dok se istovremeno povećava čvrstina kože. Terapija izaziva efekat revaskularizacije uz značajno poboljšanje cirkulacije u tkivima i stimuliše proizvodnju kolagena, jačanje dermisa i epidermisa.



NAKON TRETMANA RWT

Koža i vezivno tkivo su previše zategnuti i kompaktni. Vraća se prirodna elastičnost, sa vidljivim rezultatima i stalnim poboljšanjima izgleda kože.



Ručica aparata se može koristiti sa transmitterima za generisanje udarnih talasa. Svaki transmitter ima svoj karakteristični efekat i područje primene. Većina transmittera generiše samo udarne talase, dok postoje transmitteri udarnih talasa i vibracija.

PRIKAZ EKRANA



OPTIMALNI REZULTATI TRETMANA

- › Smanjenje obima kod 72% klijenata
- › Efekat zatezanja butina nakon serije: od 2,5 do 7 cm smanjenje u obimu
- › Čvršće noge: kod 84% klijenata podvrgnutih tretmanu
- › Izgladnena površina kože: kod 95% tretiranih klijenata

TERAPIJSKI TRETMANI

- › OPŠTA AKTIVACIJA MIŠIĆA
- › TRIGER TAČKE
- › SKAKAČKO KOLENO
- › TENISKI LAKAT
- › KALCIFIKATI
- › BUZRITIS

REZULTATI TRETMANA akustičnim talasima su povećana čvrstina i vraćena prirodna elastičnost kože i vezivnih tkiva zajedno sa vidljivim i dugotrajnim poboljšanjima u teksturi kože.

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 0151



Šifra: 0156



Šifra: 0158



Šifra: 0152



Šifra: 0157

OBLICI APLIKATORA I NAMENA

OS-M 15 mm, keramički transmitter. Prijatni tretman epidermisa, dermisa, vezivnog tkiva, celulita i razbijanje masnih ćelija.

OS-S 9 mm, visokoefikasni transmitter. Tretman epidermisa, dermisa, vezivnog tkiva, celulita i razbijanje masnih ćelija (Opcija).

OS-M 38,5 mm, radijalni pritisni talasi: aktivacija krvne i limfne cirkulacije Oblikovanja tela (Opcija).

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: RWT POWER TECHNOLOGY

Šifra: 9057

Režim rada: 220 V AC; 50/60 Hz

Snaga aparata: 350 W

Osigurač: T-2 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF

Broj sondi: 1

Broj aplikatora: 1 (opciono 2-3)

Izlazna energija: 90 mJ

Frekvencija: 1 – 15 Hz

Dimenzije ekrana: 10,2"


Broj programa: 10

Kućiste aparata: metalno

Dimenzije aparata (dxšxv): 620x370x1100 mm

Težina aparata: 40 kg

- LIMFNA DRENAŽA I TONIRANJE
- MASAŽA PRITISKOM
- ZATEZANJE I OBLIKOVANJE

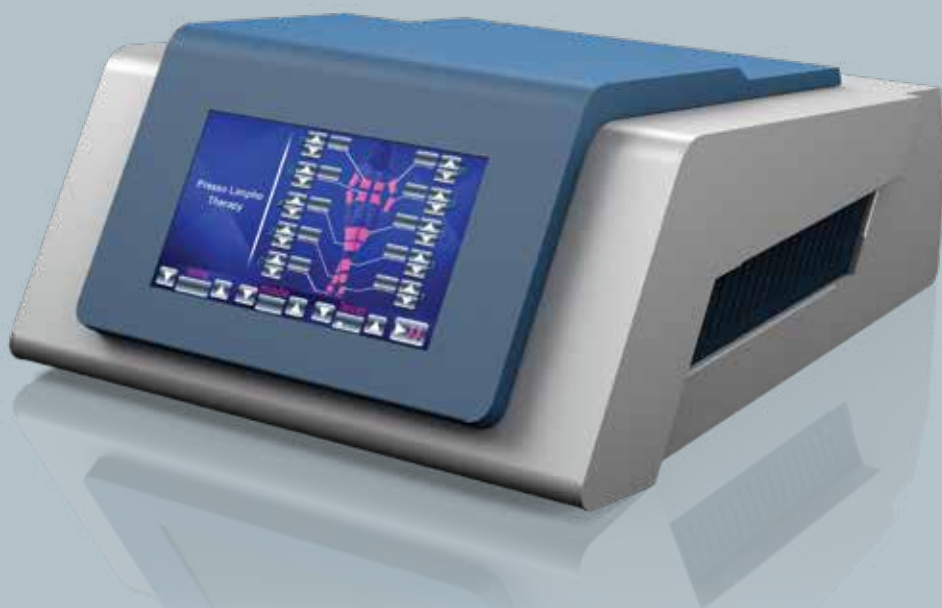

APARATI ZA TELO

BEAUTY AIR MASSAGER

Šifra: 6888

BEAUTY AIR MASSAGER JE UREĐAJ DIZAJNIRAN ZA BORBU SA OPUŠTENOM KOŽOM, MASNIM NASLAGAMA I PROBLEMIMA KOJI NASTAJU USLED ZADRŽAVANJA VODE, KAO I ZA SMANJIVANJE CELULITA I PREOBLIKOVANJE TELA.

KAKO DELUJE MASAŽA PRITISKOM (PRESOTERAPIJA)

Limfni sistem je odgovoran za uklanjanje intersticijalne tečnosti iz tkiva, apsorbuje i transportuje masne kiseline i masti iz cirkulatornog sistema i transportuje antigen prezentujuće ćelije do limfnih čvorova gde se stimuliše imunološka odbrana organizma. Oboljenja i problemi u limfnom sistemu najčešće uzrokuju oteku, akumulaciju masnoća i druge simptome.

Limfna drenaža utiče na pokretanje limfe smanjujući otok, bol i depozite celulita prouzrokovane zastojem limfotoka i metabolizma u ekstremitetima.

Presoterapija se preporučuje u tretmanima celulita, gojaznosti, edema, osećaja "umornih i otežalih nogu", u tretmanima detoksikacije.

DRENAŽA

Drenaža u korenu odstranjuje uzrok neuglednih i bolnih stanja kao što su: zastoji u cirkulisanju krvi i limfe donjih i gornjih udova; bolovi u nozi usled loše cirkulacije; zadržavanje vode usled deformiteta kičmenog stuba, celulit.

MASAŽA VAZDUŠNIM PRITISKOM

Ovaj sistem omogućava postepenu i progresivnu drenažu, sličnu onoj koja se vrši ručnom masažom, i to tako što se primenjuje različit pritisak koji može da generiše i ekskluzivne nizove operacija kojima aktivira različite sektore.

SPECIJALNA ODELA

Nova odela za masažu pritiskom podeljena su na stopala, noge, stomak, ruke. Odeli se mogu podešavati prema visini klijenta i obima nogu i ruku, sa naizmeničnim unutrašnjim vazdušnim komorama.

ODELO

Oprema, koja se sastoji od specijalnog odela podeljenog u sektore, podstiče cirkulaciju krvi i limfe, i na taj način svojom efikasnošću pomaže pri najčešćim problemima kože kao što su celulit i zadržavanje tečnosti.



SPECIJALNA ODELA

Nova odela za masažu pritiskom podeljena su na stopala, stomak, ruke; odela se mogu podešavati prema visini klijenta i obima nogu i ruku, sa naizmeničnim unutrašnjim vazдушnim komorama.

PROGRAMI

- › PROGRAM 0 – LIMFNA DRENAŽA
- › PROGRAMI ZA CELULIT
- › MIŠIČNI ZAMOR NAKON SPORTSKIH AKTIVNOSTI
- › RAZLIČITI OBLICI LIMFEDEMA

REZULTATI – ŠTA SE POSTIŽE PRESOTERAPIJOM

- › Poboljšanje venske cirkulacije, posebno kod proširenih vena i problema sa kapilarima
- › Prevencija pojave i otklanjanje celulita
- › Otklanjanje tegoba kod umornih, teških nogu
- › Poboljšanje ukupnog stanja imunog sistema

PREDNOSTI:

- › Kompletna personalizacija svih programa
- › Momentalno poboljšanje cirkulacije
- › Maksimalna udobnost i relaksacija za klijenta



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: BEAUTY AIR MASSAGER
 Šifra aparata: 6888
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Snaga aparata: 50 W
 Osigurač: T-3 A
 Broj kanala: 10
 Broj komora: 20
 Broj programa: 4
 Broj delova odela: 7 (ruke x 2 kom, noge x 2 kom, stopala x 2 kom, stomak x 1 kom)
 Pritisak u komorama: 20-40 KPa
 Protok vazduha: 25-40 Lpm
 Trajanje jednog pritiska: 0-15 s
 Ekran: Touch screen 7" u boji
 Dimenzije aparata: 320x410x180 mm
 Težina aparata: 6,5 kg
 Bruto težina: 18 kg

- SPECIJALNA KARBONSKA VLAKNA
- 3 ZONE RADA
- 3 TEMPERATURNI MODALITETA
- DIGITALNA KONTROLNA JEDINIČA
- MOGUĆNOST ZASEBNOG PODEŠAVANJA SVAKE ZONE



APARATI ZA TELO TERMO ČEBE

Šifra: 6459

Zagrevanje organizma infracrvenim zracima električnog termo čebeta, pruža efekat saune čime se utiče na ceo organizam - ubrzava se cirkulacija, podstiče metabolizam i regeneracija ćelija.

TRETMANI

- > CELO TELO
- > NOGE
- > STOMAK
- > GRUDI I RUKE

Zagrevanjem se utiče na masne naslage koje se pretvaraju u slobodne masne kiseline pa ih organizam može apsorbovati i prirodnim putem izbaciti.



EFEKTI TERMO ČEBETA

- > DUBINSKO ZAGREVANJE KOŽE
- > DRENAŽA MEĐUĆELIJSKE TEČNOSTI
- > RAZLAGANJE MASNIH ČELIJA
- > ČISTI KRVOTOK OSLOBAĐAJUĆI OD TOKSINA
- > POVEĆANJE IMUNITETA TELA
- > UBRZAVA CIRKULACIJU

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: TERMO ČEBE
 Šifra aparata: 6459
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Snaga aparata: 480 W
 Snaga čebeta: 3 x 120 W
 Broj kanala (segmenata): 3
 Kontrola temperature: 20-55°C
 Digitalni tajmer do maksimalno 60 minuta
 Materijal prostirke: poliuretan
 Dimenzije aparata: 290x250x130 mm
 Dimenzije prostirke: 210x80 cm
 Težina aparata: 6,4 kg
 Težina prostirke: 5,8 kg
 Dimenzije pakovanja: 780x450x265 mm
 Bruto težina: 14,5 kg

- UKLANJANJE MASNIH NASLAGA
- NEINVAZIVNA, BEZBOLNA METODA
- PROGRAMI ZA REGIJE SA MANJE I VIŠE MASNOĆA



APARATI ZA TELO

CAVITE STAR

ULTRAZVUČNA KAVITACIJA

Šifra: 9091

Autentični tretmani redukcije lokalnih masnoća na butinama, stomaku, bokovima, nadlakticama.


ULTRAZVUČNA LIPOLIZA

Napredni i potpuno inovativni CAVITE STAR koncept zasnovali smo na neraskidivoj vezi između savremene moderne tehnologije uz CAVITE STAR aparat za kavitaciju i preparata nove generacije koji preoblikuju telo, čineći ga jedrim, zategnutim, bez celulita i masnih naslaga.

PRIMENA

Masti – trigliceridi se u ćelijama potkožnog masnog tkiva specifičnom frekvencijom ultrazvučnih talasa prevode u monogliceride što uz istovremeno povećanje propustljivosti membrane masnih ćelija dovodi do izbacivanja masti iz ćelija u limfotok i njihovog odstranjivanja iz organizma.

DELOVANJE LIPOLIZE NA TKIVO

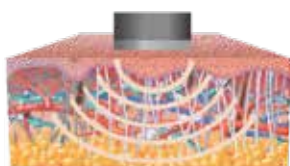

Elektrolipoliza povećava aktivnost ćelija, ubrzava cirkulaciju, podstiče ćelijsku razmenu i lokalno sagorevanje masnih naslaga.

PROGRAMI

- › NORMAL
- › CONTINUOUS
- › PULSE
- › PEP SYSTEM

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 9063



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: CAVITE STAR
 Šifra proizvoda: 9091
 Režim rada: 220-230 V AC; 50/60 Hz
 Snaga: 180 W
 Osigurač: T-2 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj sondi: 1
 Broj programa: 4
 Izvor energije: piezokeramički pretvarač
 Nominalna frekvencija: 40 KHz
 Napon na izlaznom modulu - propisana vrednost Vpp 400-450 V
 Režim rada: kontinualni i impulsni
 Dimenzije aparata (dxšxv): 340x270x135 mm
 Težina aparata: 3 kg

- BEZBOLAN TRETMAN
- NEINVANZIVNA METODA
- BRŽI REZULTATI
- JEDNOSTAVNO RUKOVANJE



APARATI ZA TELO

CAVITE EXCLUSIVE

ULTRAZVUČNA KAVITACIJA

Šifra: 5057

Glavna namena ovog uređaja je uklanjanje masnih naslaga iz organizma putem procesa poznatog kao "ULTRAZVUČNA LIPOLIZA". Ovaj moderni uređaj raspolaže mnoštvom različitih programa i prilagođenih tretmana različitim delovima ljudskog tela. Projektovan je tako da njegova upotreba pruža ugodan tretman pacijentima i u isto vreme ne zamara operatera.

Tretman izvođen aparatom CAVITE EXCLUSIVE se ubraja u neinvanzivnu metodu primene kavitacijskog efekta na tkivo. Njegove jedinstvene karakteristike fokusiranog i lokalizovanog delovanja omogućuju izvođenje prijatnog i delotvornog tretmana na gornjem delu ruku, nogu, gluteusa, bedrima, stomaku.

CAVITE EXCLUSIVE se koristi kod sledećih indikacija:

- > PREKOMERNA DEBLJINA
- > PROBLEMI SA CELULITOM
- > LIMFNI I VENSKI ZASTOJ

TIPOVI TRETMANA

Postoje četiri osnovne vrste tretmana koje zavise od debljine masnih naslaga kod osobe, kao i njenog trenutnog zdravstvenog stanja. Izborom tipa tretmana u info delu ekrana pojaviće se prikaz tačaka na telu u kojima je dozvoljen ovakav tretman. U dodatnom meniju neki delovi tela imaju uvedenu dodatnu dublju podelu pa samim tim i više programa. Vrednosti jačine i trajanja tretmana najčešće nije potrebno modifikovati jer su unapred prilagođene izabranom tretmanu i delu tela.



PRIKAZ EKRANA



PROGRAMI


- > **Program NORMAL CAVITATION**
Za klijente sa relativno tankim naslagama masnoće ili kod klijenata koji su bili podvrgnuti određenom broju tretmana- do 1,5 cm
- > **Program PULSE**
Za klijente sa debljinom masnih naslaga 1,5-3,5 cm
- > **Program CONTINUOUS CAVITATION**
Za klijente sa masnim naslagama iznad 3,5 cm
- > **Program PEP**
Za klijente sa masnim naslagama i celulitom



BIOHEMIJSKA ANALIZA UNOSA

Bezbednost aparata CAVITE EXCLUSIVE zasnovana je na biohemijskoj analizi krvi, i u njemu postoji zahtev za unos vrednosti lipidograma, triglicerida i glikemije. Ukoliko vrednosti prelaze dozvoljene, javlja se upozorenje da takav klijent nije adekvatan za tretman.

DELOVANJE LIPOLIZE NA TKIVO

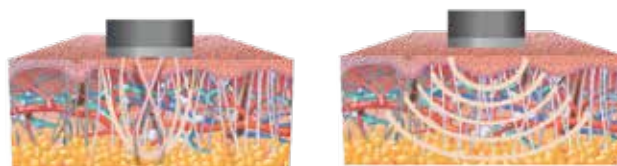

Elektrolipoliza povećava aktivnost ćelija, ubrzava cirkulaciju, podstiče ćelijsku razmenu i lokalno sagorevanje masnih naslaga. Ovo dejstvo na taj način reaktivira oblasti gde se masne naslage nagomilavaju (bokovi, abdomen, kolena, butine), uključujući mnogo faktora, i nezamenljiva je za revitalizaciju oblasti zahvaćenih celulitom gde krv ne cirkuliše pravilno

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: CAVITE EXCLUSIVE
Šifra proizvoda: 5057
Režim rada: 220-230 V AC; 50/60 Hz
Snaga: 180 W
Osigurač: T-2x2 A
Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
Kućište: poliester
Ekran: 10,2" touch screen
Broj sondi: 1
Broj programa: 4
Broj regija u okviru programa: 3-5
Izvor energije: piezokeramički pretvarač
Nominalna frekvencija: 40 KHz
Napon na izlaznom modulu - propisana vrednost Vpp 400-450 V
Režim rada: kontinualni i impulsni
Dimenzije aparata (dxšxv): 420x370x1240 mm
Težina aparata: 18 kg

- REDUKCIJA MASNIH NASLAGA
- OBLIKOVANJE TELA
- POBOLJŠANJE UKUPNOG IZGLEDA



APARATI ZA TELO

CAVITE PERFECT PORTABLE

ULTRAZVUČNA KAVITACIJA

Šifra: 5059

Ultrazvučna lipoliza je metoda kojom se bez hirurške intervencije razlažu i odstranjuju masti iz potkožnog masnog tkiva. Masti – trigliceridi se u ćelijama potkožnog masnog tkiva specifičnom frekvencijom ultrazvučnih talasa prevode u monogliceride što uz istovremeno povećanje propustljivosti membrane masnih ćelija dovodi do izlaska masti iz ćelija u limfotok i njihovog odstranjivanja iz organizma.

Idealan za lokalnu redukciju obima (bokovi, unutrašnja strana butina, natkolence, gluteus, stomak).

Može se kombinovati sa drugim procedurama (Ultra Contour, Vakuum, Elektrostimulacija).

PROGRAMI

- > NORMAL CAVITATION
- > CONTINUOUS CAVITATION
- > PEP SYSTEM
- > PULSE SYSTEM

PRATEĆA OPREMA



Šifra 9063

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: CAVITE PERFECT PORTABLE

Šifra proizvoda: 5059

Režim rada: 220-230 V AC; 50/60 Hz

Snaga: 180 W

Osigurač: T-2 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, T type BF

Broj sondi: 1

Broj programa: 4

Izvor energije: piezokeramički pretvarač

Nominalna frekvencija: 40 KHz

Napon na izlaznom modulu - propisana vrednost Vpp 400-450 V

Režim rada: kontinualni i impulsni

Dimenzije aparata (dxšxv): 450x330x180 mm

Težina aparata: 10 kg



- LIFTING OSETLJIVE KOŽE
- OČNA ZONA- KAPCI
- LIFTING
- TURGOR KOŽE
- TRETMAN RUKU
- ZATEZANJE BUTINA
- TONIFIKACIJA STOMAKA



APARATI ZA LICE I TELO

RF DYNAMIC FACE & BODY

RADIOTALASNI LIFTING LICA I TELA

Šifra: 5058

RF DYNAMIC FACE & BODY je tehnološki napredan aparat koji nudi ekstremnu jednostavnost upotrebe i veliku svestranost. Omogućava trenutno podmlađivanje i zatezanje kože lica i vidno smanjene masti i celulita na telu.

Kroz sofisticirani elektronski sistem, on prenosi toplotu dublje u masno i potkožno tkivo bez oštećenja epiderma, pružajući koži mlađi i zategnutiji izgled.

Učestalost tretmana omogućava bolju cirkulaciju krvi, vraćajući zategnutost mišićima lica. Tretman lica se preporučuje i osobama starije dobi i sa vidljivijim nesavršenostima. Raditalasi svojim toplotnim efektom izazivaju sintezu novog kolagena i elastina, dok ispravljene spirale već prisutnog kolagena kontrahuju, što dovodi do momentalnog zatezanja kože, a efekat liftinga vidi se odmah nakon prvog tretmana.

Ovaj tretman je pogodan za lice i telo, bore i linije oko očiju, spuštene kapke, kesice oko očiju, bore na čelu i licu, kesaste obraze, nazolabijalne bore, duplu bradu i bore vrata. Tretira se opuštena koža dekoltea, grudi, ruku, stomaka, butina i kolena.

FRAKCIONISANI NAČIN PODMLAĐIVANJA

Sistem rada RF DYNAMICOM je frakcionisana energija - podeljena na najsitnije delove, gde se osim obnove na površinskom delu, toplota plasira i u dublje slojeve tkiva.

Efekat koji se postiže je potpuna obnova spoljašnje površine kože, ali i jaka stimulacija proizvodnje novog kolagena u dubljim slojevima kože. Kako je kolagen osnovni sastojak koji kožu čini čvrstom i zategnutom, dobijamo podmlađivanje sa očuvanim prirodnim izgledom, koristeći prirodne potencijale svog organizma.

LICE

Radiotalasni lifting se radi kod atonične kože, prevremenog starenja, fotostarenja, smanjenog turgora kože, pre i post-hirurških tretmana. Na čelu i oko očiju sitnije bore nestaju, duboke postaju značajno pliće, nazolabijalne brazde se smanjuju, koža zateže.

TELO

Radiotalasni lifting tela može da se radi nakon kavitacijskog tretmana, zatim kod zatezanja grudi, gluteusa, opuštene kože (stomaka, unutrašnje strane butine, ruku), za smanjenje strija i anticelulit tretmane.

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 8090



Šifra: 8091

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: RF DYNAMIC FACE & BODY
 Izvor energije: radiofrekvencija
 Šifra aparata: 5058
 Izlazna snaga: max 50 W
 Izlazna snaga velike ručice: 160 V
 Izlazna snaga male ručice: 110 V
 RF frekvencija: 1 MHz
 Radna temperatura: -10 do 40°C
 Napajanje: 220-240 V, 50-60 Hz
 Dimenzije (dxšxv): 320x400x200 mm
 Težina: 5 kg

- REDUKCIJA MASNIH NASLAGA
- SNAŽNA INDUKCIJA FIBROBLASTA ZA STVARANJE NOVOG KOLAGENA I ELASTINA
- REMODELIRANJE POSTOJEĆEG KOLAGENA
- OJAČAVANJE STRUKTURE KOŽE I OTPORNOST KA STARENJU



Šifra: 8113

APARATI ZA TELO

RF ENERGY FACE & BODY

RADIOTALASNI LIFTING ZA LICE I TELO

RADIO FREKVENCIJA JE DANAS NAJNAPREDNIJI SISTEM ZA POSTIZANJE ODLIČNIH REZULTATA I SMANJENJE NEPRAVILNOSTI KOJI UTIČU NA POVRŠINSKI DEO KOŽE KAO ŠTO SU BORE, ZNACI STARENJA, OPUŠTENA KOŽA, STRIJE I NERAVNINE UZROKOVANE CELULITOM.

Dijatermija zagreva masne naslage i potkožno tkivo u oblastima koje se tretiraju na kontrolisan i samim tim, bezbedan način. Ona dovodi do vazodilatacije i do povećanja količine kiseonika koji se dovodi do tkiva i ubrzava metabolizam stimulišući proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline i ima relaksirajući i tonirajući efekat na tkivo.

FRAKCIONISANI NAČIN PODMLAĐIVANJA

Sistem rada RF ENERGY aparatom je frakcionisana energija - podeljena na najsitnije delove, gde se, osim obnove na površinskom delu, toplota plasira i u dubljim slojevima tkiva.

Efekat koji se postiže je potpuna obnova spoljašnje površine kože, ali i jaka stimulacija proizvodnje novog kolagena u dubljim slojevima tkiva. Kako je kolagen osnovni sastojak koji kožu čini čvrstom i zategnutom, dobijamo podmlađivanje sa očuvanim prirodnim izgledom, koristeći prirodne potencijale svog organizma.

Tehnološki napredan aparat RF ENERGY zagreva srednji sloj kože u kojem se nalaze kolagen i elastin, elastična vlakna koja daju čvrstinu koži. Na tako zagrevanje koža reaguje pokretanjem procesa obnavljanja elastičnih vlakana. Kao rezultat se stvara efekat zatezanja koji je posledica reakcije kolagena u vidu učvršćivanja i postizanja jedrine.





SPECIFIČNOSTI APARATA

- > Neinvazivna, bezbolna i bezbedna procedura sa momentalnim i produženim dejstvom
- > RF ENERGY-em se menja polaritet električnog polja 40 miliona puta u sekundi, dovodeći do ujednačene termolize dubljih slojeva kože, sa minimalnim uticajem na površinske slojeve
- > Ravnomerno emitovana toplota omogućava kvalitetnije zagrevanje tkiva i brže dostizanje potrebne temperature za sklerozaciju kolagenih vlakana
- > Multipolarne sonde za ujednačeno emitovanje toplote u dublje slojeve
- > Touch ekran sa programski definisanim funkcijama za lice i telo
- > Prikaz ekrana sa pokretima na određenim zonama lica i tela

EFEKTI

- > Snažna indukcija fibroblasta za stvaranje novog kolagena i elastina
- > Remodeliranje postojećeg kolagena
- > Ojačavanje strukture kože i otpornost ka starenju

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 8091



Šifra: 8090

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: RF ENERGY FACE & BODY
 Šifra proizvoda: 8113
 Napajanje: 220-240 V AC; 50/60 Hz
 Snaga: 220 W
 Osigurač: T-2 A
 Zaštitna klasa: IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj sondi: 2
 Broj programa: 8
 Kućište: poliester
 Izvor energije: Radiofrekvencija
 Frekvencija: 1 MHz
 Radna temperatura: od -10°C do 40°C
 Dimenzije aparata (dxšxv): 410x400x1280 mm
 Težina: 18 kg

- EFEKAT ZATEZANJA
- DEJSTVO REGENERACIJE
- JAČANJE POTKOŽNOG TKIVA



APARATI ZA TELO

RF BODY TOUCH UG

RADIOTALASNI LIFTING ZA TELO

Šifra: 9879

EFEKAT TOPLJENJA MASTI I ZATEZANJA KOŽE

Bio fizički efekat radio frekvencije zasniva se na transformaciji energije u toplotu. Ona ubrzava lokalni metabolizam, kao i protok krvi u mikrocirkulaciji, eliminiše zadržavanje vode u kapilarima, oslobađa međutkivo od edema, obnavlja temperaturu neophodnu za reaktiviranje lipolize, zaustavlja fibrozu reakciju potkožnog tkiva, smanjuje opuštenost kože i nepravilnosti izazvane celulitom.

DEJSTVO REGENERACIJE

Ovaj tretan koristi proces dijatermije, koji omogućava vazodilataciju i povećava dotok kiseonika ka tkivima, ubrzava ćelijski metabolizam i stimuliše proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, čineći kožu elastičnom i čvrstom.

JAČANJE POTKOŽNOG TKIVA

Ravnomerno emitovana toplota omogućava kvalitetnije zagrevanje tkiva i brže dostizanje potrebne temperature za sklerozaciju kolagenih vlakana. Hiperemija je intenzivnija i dugotrajnija nego kod RF radiotalasa manje snage.

Povećana je aktivnost fibroblasta i samim tim i produkcija kolagena. Pored trenutnog efekta retrakcije već postojećeg kolagena, tretman dodatno stimuliše stvaranje novog kolagena.



PRIKAZ EKRANA



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: RF BODY TOUCH UG

Šifra: 9879

Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz

Snaga aparata: 50 W

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF

Ekran: Touch screen ekran 7" u boji

Izvor energije: Radiofrekvencija

Frekvencija: 1 MHz

Radna temperatura: do 40°C

Broj programa: 4

Broj sondi: 1

Dimenzije aparata (dxšxv): 320x400x200 mm

Težina aparata: 8 kg

- UBRZAVA CIRKULACIJU
- POBOLJŠAVA OKSIGENACIJU TKIVA
- STIMULIŠE PROIZVODNJU ELASTINA I KOLAGENA
- PODSTIČE CIRKULACIJU KRV I RAZMENU MATERIJA
- POBOLJŠAVA DOTOK KISEONIKA U MIŠIĆIMA



APARATI ZA TELO

RF FACE BODY TOUCH UG

RADIOTALASNI LIFTING ZA LICE I TELO

Šifra: 9880

RF FACE BODY TOUCH UG menja polaritet električnog polja 40 miliona puta u sekundi, dovodeći do ujednačene termolize dubljih slojeva kože. Nova tehnologija je u stvari specifična kombinacija visoke frekvencije bipolarnih radiotalasa i odgovarajućih pokreta sonde.

Radiotalasnim liftingom zagreva se srednji sloj kože u kome se nalaze kolagen i elastin, vlakna koja daju čvrstinu koži. Na takvo zagrevanje koža reaguje pokretanjem procesa obnavljanja ovih vlakana.

Tretman RF FACE BODY je namenjen za lice i telo i uključuje bore i linije oko očiju, spuštene kapke, kesice oko očiju, fine bore čela i lica, opušteno obraze, podbradak, deklote, grudi, ruke, stomak i butine.

Kao rezultat se stvara efekat vidnog zatezanja kože, koji je posledica reakcije kolagena u vidu učvršćivanja i postizanja jedrine.

PROGRAMI FACE

- > LIFTING
- > OSETLJIVA KOŽA
- > OČNA REGIJA
- > REGIJA VRATA



Šifra: 8091

PROGRAMI BODY

- > RUKE
- > BUTINE
- > STOMAK
- > GLUTEUS



Šifra: 8090

PREDNOSTI APARATA RF FACE BODY TOUCH UG

- > PUTEM PRECIZNIH PROGRAMA DELUJE CILJANO NA POPRAVLJANJE STRUKTURE KOŽE
- > PUTEM 40 MIL. PULSEVA NA VISOKOTEHNOLOŠKI NAČIN DOVODI DO REKONSTRUKCIJE MREŽE KOLAGENIH I ELASTIČNIH VLAKANA
- > PRECIZNIM ZAGREVANJEM UTIČE NA UVEĆANU PROIZVODNJU KOLAGENA SA DUGOROČNIM, VIDLJIVIM I OSETNIM POBOLJŠANJEM.

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: RF FACE & BODY TOUCH UG
 Šifra: 9880
 Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz
 Snaga aparata: 50 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF
 Ekran: Touch screen ekran 7" u boji
 Izvor energije: Radiofrekvencija
 Frekvencija: 1 MHz
 Radna temperatura: do 40°C
 Broj programa: 8 (4 za telo + 4 za lice)
 Broj sonde: 2 (1 za telo + 1 za lice)
 Dimenzije aparata (dxšxv): 320x400x200 mm
 Težina aparata: 8 kg

- KOMPAKTNI CELULIT
- CELULIT
- EDEMATOZNI CELULIT
- SOFT CELULIT
- MASNE ČELIJE



APARATI ZA TELO

BODY MASTER

PROGRAMSKI MIŠIĆNI STIMULATOR

Šifra: 8086

BODY MASTER je aparat koji kombinuje programsku jednostavnost korišćenja, efikasnost tretmana, kombinaciju elektro talasa.

Daje maksimalnu efikasnost i prijatan osećaj u bilo kom izabranom programu, omogućava potrošnju energije pasivnim putem kroz aktivaciju mišića, oblikovanje, zatezanje stomaka, gluteusa, butina, ruku, grudi.

BODY MASTER je idealan partner tela po meri.

PRINCIP DELOVANJA

- > Različiti faktori uzrokuju nastanak celulita: hormonski, vaskularni, cirkulatorni
- > Aparat se zasniva na vrsti elektroterapije za rešavanje celulita i lokalizovanih masnih naslaga
- > Kreiran je za stimulaciju tranzita cirkulacije
- > Postavljanjem elektrode u koordinaciji sa limfnim čvorom, oslobađaju se stvorene blokade i to dodatno oslobađa prolaz tečnosti
- > Svrha ovog tretmana je da stimuliše mišiće na specifičan način za dobijanje ojačanog mišićnog tkiva

PROGRAMI:

- > Program 1 - program razgradnje celulita
- > Program 2 - program jačanja i oblikovanja mišića
- > Program 3 - program tonifikacija mišića
- > Program 4 - program jačanja i podizanja grudi
- > Program 5 - program limfne drenaže
- > Program 6 - program jačanja mišića ruku
- > Program 7 - program jačanja i podizanja gluteusa
- > Program 8 - program kod spondiloze
- > Program 9 - program kod lumbaga
- > Program 10 - program kod atrofije mišića posle duže imobilizacije



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: BODY MASTER
 Šifra proizvoda: 8086
 Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz
 Snaga: 150 W
 Osigurač: T-2 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, BF
 Dimenzije displeja: 80x36 mm
 Broj elektroda: 24
 Broj programa: 10
 Kućište: Polystirol
 Maksimalna izlazna struja: 0-30 mA AC
 Izlazna frekvencija: 10-200 Hz
 Tajmer: 1-60 min
 Regulacija frekvencije: 1-200Hz
 Regulacija relaksacije: 1-10sec
 Regulacija intenziteta svakog kanala pojedinačno
 Dimenzije aparata (dxšxv): 450x330x180 mm
 Težina aparata: 12 kg

- KOMPAKTNI CELULIT
- SOFT CELULIT
- EDEMATOZNI CELULIT
- MASNE ČELIJE



APARATI ZA TELO

CELOS 12 C

MIŠIĆNI STIMULATOR

Šifra: 8087

CELOS 12C generiše električne talase koji poboljšavaju efikasnost i prijatnost tretmana. Osećaj opuštenosti i zadovoljstva u toku tretmana, omogućava oblikovanje tela, njegovo toniranje i potpunu relaksaciju.

Tretmani zadnjice, stomaka, butina, ruku mogu biti tretirani u svim oblicima celulita, opuštenosti i neestetskog izgleda.

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 0872



Šifra: 8089/1



Šifra: 9075



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: CELOS 12C
 Šifra proizvoda: 8087
 Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz
 Snaga: 150 W
 Osigurač: T-2 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, BF
 Broj elektroda: 24
 Kućiste: Polystirol
 Maksimalna izlazna struja: 0-30 mA AC
 Izlazna frekvencija: 10-200 Hz
 Tajmer: 1-60 min
 Regulacija frekvencije: 1-200 Hz
 Regulacija relaksacije: 1-10 sec
 Regulacija intenziteta svakog kanala pojedinačno
 Dimenzije aparata (dxšxv): 450x330x180 mm
 Težina aparata: 12 kg

- INTENZIVIRANJE OPŠTEG METABOLIČKOG PROCESA
- UBRZANJE SINTEZE KOLAGENA
- AKTIVIRANJE VODOVEZUJUĆIH SISTEMA U KOŽI
- POPRAVLJANJE TURGORA I JEDRINE KOŽE
- POPRAVLJANJE STANJA OŽILJAKA
- POPRAVLJANJE STANJA CELULITA



APARATI ZA TELO I LICE

ULTRASOUND DS FACE & BODY

ULTRAZVUK ZA LICE I TELO

Šifra: 5051

DELOVANJE ULTRAZVUKA

- > POBOLJŠANJE MIKROCIRKULACIJE KOŽE POVEĆANOM ISHRANOM KISEONIKOM
- > POVEĆANA PROPUSTLJIVOST ČELIJSKE MEMBRANE BAZALNOG SLOJA
- > POVEĆANA HIDRATACIJA ZBOG OSMOTSKOG EFEKTA KOMPRESIJE I DEKOMPRESIJE TEČNOSTI
- > MIKRO-MASAŽA TKIVA
- > TERMALNI EFEKAT – PROMENA TEMPERATURE
- > HEMIJSKI EFEKAT

EFEKTI ULTRAZVUKA

Da bi se dobio odgovarajući efekat negovane i zdrave kože, neophodno je koristiti ultrazvuk na dermalnom nivou.



PROGRAMI ZA LICE

1. Program za akne
2. Program za proširene pore
3. Program za hidrataciju kože lica
4. Program za lifting
5. Program za hiperpigmentaciju
6. Program za tonifikaciju lica i podbratka

PROGRAMI ZA TELO

1. Meki oblik celulita
2. Tvrdi oblik celulita
3. Tretman ožiljaka
4. Tretman kapilara
5. Tretman strija
6. Program za lokomotorni aparat
7. Program za nervni sistem

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: ULTRASOUND DS FACE & BODY

Šifra proizvoda: 5051

Napajanje: 220-240 V AC; 50/60 Hz

Snaga: 100 W

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Modalitet rada: Kontinualni impulsni 25 – 50 – 75%

Broj sondi: 2 (1 za telo + 1 za lice)

Frekvencija ultrazvuka: 1 MHz

Broj programa: 3

Materijal sondi: Abs plastika

Dimenzije (dxšxv): 345x270x135 mm

Težina: 3,5 kg



APARATI ZA TELO I LICE

VACUUM FACE & BODY

KOMBINOVANA METODA VAKUUM TERAPIJE I DIJAMANTSKE DERMOABRAZIJE

Šifra: 9025

Aparat VACUUM FACE & BODY nudi korisniku prijatnu i praktičnu metodu za terapiju promena u potkožnom tkivu, koja je poznata kao vakum terapija. Kontrolisani vakum pospešuje tok krvi i kiseonika u ćelijama, poboljšava cirkulaciju limfe i uklanja iz tela prekomernu tečnost, stimuliše nastajanje kolagena i pospešuje metabolizam.

Za razliku od ručne masaže koja se izvodi pritiskom od spolja ka unutrašnjosti, endomasaža sukcijom postiže odlepljivanje tkiva, stvarajući dubinsku masažu od unutrašnjosti ka spoljašnjosti.

Druga metoda aparata VACUUM FACE & BODY zasnovana je na postupku dijamantske dermoabrazije.

Njenom primenom značajno se pojačava mikrocirkulacija i propusnost kapilara, što omogućava bolju oksigenaciju i metabolizam kože. Dijamanstkom dermoabrazijom umanjuju se duboki ožiljci i dubina samih pora i omogućava stvaranje novih ćelija.

Tehničke karakteristike

Tip aparata: VACUUM FACE & BODY

Šifra: 9025

Kućište: polistirol

Vacum motor: 12 V DC

Vacum max: 850 mBar

Pritisak max: 7,2l pm

Snaga motora: 28 W na 12 V DC

Napajanje: 230 V AC 50/60 Hz

Maksimalna snaga: 26 V A

Zaštitna klasa: I, BF

Dimenzije: 320x400x200 mm

Težina: 5 kg



FACE PROGRAM



FACE CREATOR

Šifra 9024



DERMO OXY

Šifra 9825



MEZO RF LIFT TOUCH UG

Šifra 9870



RF DYNAMIC FACE

Šifra 5062

FACE PROGRAM

Komplet sistemi za tretman lica

Anti aging aparati

Higijenski i Oxygen sistemi

KOMPLET SISTEMI ZA TRETMANE LICA



Šifra 9024

Šifra 8095

Face
Creator

Face
Exclusive
Modul

ANTI AGING TRETMANI LICA



Šifra 9825

Šifra 9878

Šifra 5062

Šifra 9096

Šifra 9870

Šifra 9081

Šifra 9828

Šifra 4051

Šifra 4052

Dermo
Oxy

RF Face
Touch

RF Dynamic
Face

Mezo RF
Lift

Mezo RF
Lift Touch

Mezo Skin
ep

Face Lift
Mask

Lifting
M-Bauty

Deep
Clean

HIGIJENSKI TRETMANI LICA



Šifra 2028

Šifra 6627

Šifra 2025

Šifra 2025/1

Šifra 2027

Šifra 6444

Darsonval
AS

Darsonval
Portabl

Jonos
AS10

Jonos
AS30

Jonos
Darsonval

Vapozon
FM-601



Šifra 8092

Šifra 8103

Šifra 8104

Šifra 9089

Šifra 6740

Šifra 6425

Šifra 8090/1

Termo
Maska

Biolaser
DS 100mW

Ultrasonic
Skin System

Ultrapeel +
PDT LED

Kozmetička
lupa Hrom
lux

Kozmetička
LED lupa

Stalak za
lupu



KOZMETIČKI TRETMANI LICA

Ultrazvučna špatula

Ultrazvučni tretman lica i očne regije

Mezoporacija

Vakuum tretman

Dijamantska dermoabrazija

Visoka frekvencija - tretman dezinfekcije lica

Biostimulativni laser

STANDARDNI KOMPLET:

- **ULTRAPEEL** - piling lica ultrazvučnom špatulom
- **DIAMOND PEEL** - dijamantska dermoabrazija
- **VACUUM EXPEDITE** - poboljšanje periferne cirkulacije i drenaže
- **MESOTHERAPY** - unos preparata mezoporacije
- **RF LIFT** - radiotalasni lifting
- **ULTRA FACE** - povećanje brzine metaboličkih reakcija
- **LASER REGENERATION** - regeneracija i obnavljanje strukture derma
- **HIGH FREQUENCY** - isušujuće dejstvo

DODATNE FUNKCIJE

(NISU UKLJUČENE U STANDARDNI KOMPLET):

- **OZONIRANJE - VAPOZON** - blagotvorno delovanje vodene pare omogućava efikasan antibakterijski učinak
- **KOZMETIČKA LUPA** - za uvećanje radne površine

APARATI ZA LICE

FACE CREATOR

KOMPLET SISTEM ZA TRETMAN LICA



Šifra 9024

MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ KOJI KOMBINUJE 8-10 METODA ZA TRETMANE REGENERACIJE, PILINGA, PODMLAĐIVANJA PODELJEN JE NA SEGMENTE: EKSFOLIJACIJA, STIMULACIJA, MEZOPORACIJA, PODMLADJIVANJE, ULTRAZVUČNI TRETMAN - SONOFOREZA, REGENERACIJA KOŽE LASEROM, DEZINFEKCIJA I POBOLJŠANJE PERIFERNE CIRKULACIJE.

ULTRAPEEL - 27KHz - ultrazvučni piling i čišćenje lica

Dubinsko čišćenje i ubacivanje aktivnih sastojaka. Kombinuje efekte ultrazvučne vibracije koristeći lopaticu za ravnomeran piling lica. Različite frekvencije koje se koriste omogućavaju da se izvrši regeneracija, toniranje, ucvršćivanje, i daju veoma dobre rezultate na svim tipovima kože, sa 4 specifična programa.

DIAMOND PEEL- dijamantska dermoabrazija

Ovaj tretman omogućava ravnomeran piling kože, kao i podsticanje obnavljanja ćelija u tretiranom tkivu. Povećava propustljivost kože, omogućava bolju apsorpciju kozmetičkih preparata.

VACUM EXPEDITE- vakum tretman

Ovaj tretman je prijatan i efikasan kao manuelna masaža, ali dozvoljava više jedinstvenog tretmana na licu i manje umora za kozmetičara. Koristi princip vacuum masaže sa blagom aspiracijom da bi se sprečilo oštećenje dermisa i kapilarnog sistema.

MESOTHERAPY- elektroporacija

Putem električnih impulsa, elektroporacija doprinosi otvaranju kanala u dermisu da bi se dubinski prenela supstanca koja se nanosi, u skladu sa nepravilnostima koje se tretiraju.

RF LIFT- radiotalasni lifting

Ovaj tretman koristi proces diatermije, koji omogućava vazodilaciju i povećava dotok kiseonika ka tkivima, ubrzava ćelijski metabolizam i stimuliše proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, čineći kožu elastičnom i čvrstom.

ULTRAFACE - ultrazvučni tretman lica

ULTRAZVUK na frekvenciji od 1MHz primenjuje se u tretmanima lica za tonifikaciju opuštena i umorne kože, protiv crvenila (kuperoze), za regulaciju lučenja sebuma i u tretiranju fleka nastalih usled povećane pigmentacije.



HIGH FREQUENCY - visokofrekventna struja

Primenom visokofrekventne struje postiže se stimulativni efekat na površinskoj cirkulaciji tkiva. Tome doprinosi i stvaranje ozona, koji ima antibakterijsko i isušujuće dejstvo na koži. Glavna primena je na aknoznoj, seboroičnoj koži i stimulativno delovanje preko pakovanja.

LASER REGENERATION - biostimulativni laser

BIOLASER 100mW je aparat koji stimuliše sintezu kolagena ubrzavajući tako zarastanje rana, ublažava bol (deluje analgetski), smanjuje oteke, smanjuje ožiljke, ima biološko dejstvo i povoljno deluje na imunološki sistem.

VAPOZON (Opcija - nije u osnovnom kompletu aparata)

Vapozon je aparat za raspršivanje vodene pare, hidrira kožu i pospešuje njeno disanje i razmenu materija u ćelijama. U toku tretmana, ozon se meša sa vodenom parom i jonizuje je. Jonizovana vodena para ima finu strukturu što omogućuje finu hidrataciju kože.



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: FACE CREATOR
 Šifra proizvoda: 9024
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Kućište: čelik
 Snaga: 150 W
 Osigurač: T-2 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Displej: 10,2" Touch screen u boji
 Broj sondi: 8
 Broj programa: 15
 Dimenzije (dxšxv): 620x370x1110 mm
 Težina: 30 kg



Šifra 8095

APARATI ZA LICE

FACE MODUL

KOMPLET SISTEM ZA TRETMAN LICA

MODULARNI SISTEM FACE EXCLUSIVE JE SOFISTICIRAN SISTEM KOJI KOMBINUJE RAZLIČITE FUNKCIJE ZA NAPREDNE TRETMANE LICA: DETOKSIKACIJU, PODMLAĐIVANJE, ZATEZANJE, IZBELJIVANJE...

FUNKCIONALAN I SKLADAN SKLOP

Kompaktan sistem omogućava funkcionalnost svih komponenti, njihov sklad i primenu kod standardnih i specijalnih tretmana. Dizajn sistema vizualizuje njegovu namenu i neposredan je izraz njegove funkcionalnosti.

- > Opcija **MEZOPORACIJA** – vrši otvaranje mezopora u dermisu kako bi se dubinski unela supstanca različitog sastava
- > Opcija **ULTRAZVUČNI PILING** – omogućava čišćenje lica, neinvazivni piling, unos preparata putem sonoforeze. Tretman se osim za redovno čišćenje lica preporučuje kao uvodni tretman u tretmane podmlađivanja. Rezultat je trenutno vidljiva čistoća, zategnutost i osveženje, kao i bolja prokrvljenost i vlažnost kože.
- > Opcija **DARSONVAL** – dezinfikuje kožu, umiruje, stimulativno deluje preko pakovanja. Električno dejstvo po koži povećava površinsku cirkulaciju, ubrzava proces razmene produkata, pospešuje penetraciju kozmetičkih preparata, dovodi do zarastanja rana.
- > Opcija **DEEP CLEAN** – neinvazivni piling, ravnomerno skida površinski sloj ćelija, omogućava bolju apsorpciju preparata, podmlađuje i poboljšava propusnost ćelijske membrane.
- > Opcija **ULTRAZVUK** – Intenziviranje opšteg metaboličkog procesa, popravljjanje turgora i jedrine kože, popravljjanje stanja ožiljaka, ubrzanje sinteze kolagena
- > Opcija **RADIOTALASNI LIFTING** – ubrzanje cirkulacije, poboljšanje oksigenacije tkiva, stimulacija proizvodnje elastina i kolagena, podsticanje cirkulacije, razmene materija





POTPUNA INTEGRACIJA

Sve funkcije integrisane su u module, lako primenljive i dostupne.

SIGURNOST I PRECIZNOST

Kontrolisani tretmani bazirani na proverenim parametrima stvaraju prijatan tretman sa primenom za sve tipove i stanja kože.

PRIMENA MODULARNOG SISTEMA

- > Modularni sistem funkcioniše po principu "click-and-go" modula koji imaju izmeniva kućišta sa jednostavnom instalacijom i rukovanjem
- > Zahvaljujući vrhunskom dizajnu, dodatne funkcije se mogu integrisati u postojeći modul
- > Sistem omogućava ostvarenje svih zahteva vezanih za kombinaciju funkcija i njihov redosled
- > Jednostavan za korišćenje – sve funkcije su lako dostupne zahvaljujući praktičnoj upotrebi tastera na panelu



Tehničke karakteristike

Tip aparata: FACE EXCLUSIVE MODUL
 Šifra: 8095
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Dimenzije aparata (dxšxv): 560x575x930 mm
 Težina aparata: 40 kg

- VELIKA GUSTINA MOLEKULA KISEONIKA
- UNOS KISEONIKA ZAJEDNO SA AKTIVNIM MATERIJAMA
- KISEONIK MASKA
- PILING KISEONIKOM



Šifra: 9825

APARATI ZA LICE

DERMO OXY

TRETMAN KISEONIKOM

Kiseonik je tretman koji zateže i osvežava, stimuliše ćelijsku respiraciju, povećava čvrstinu i elastičnost kože i daje efekat veće kompaktnosti i živosti. Smanjuje iritacije, deluje na strije i ožiljke, poboljšava balans kože i hidriranost, otvara pore i odlično deluje protiv upala i bakterija. Tretman je neinvazivan i nema sporednih efekata. Specijalna VECOM tehnologija omogućava izvođenje ovog tretmana putem izolovanja kiseonika od ostalih gasova i atmosfere radi poboljšanja ovog efekta.

KISEONIK KUPKA

Pretvaranjem kiseonika iz vazduha u sterilni kiseonik postiže se intenzivna oksigenacija i detoksikacija ćelija kože. Postepeno se podstiče metabolizam ćelija i jačaju sve fiziološke funkcije kože, što za rezultat ima poboljšanje opšteg funkcionisanja, strukture i izgleda kože.

TEČNI KISEONIK

Stimulacijom ćelijskog metabolizma, kroz prethodno vezivanje, prenos i oslobađanje atmosferskog kiseonika, stvara se oksigenacija, poboljšava mikrocirkulacija i kao rezultat dobija detoksikacija organizma (vezivanjem i uklanjanjem ugljen dioksida).

KISEONIK PILING

Sistem kojim se sprovodi ovaj piling koristi fiziološki rastvor i medicinski kiseonik pod visokim pritiskom, pri čemu dolazi do formiranja vodenih kapi veličine od 5 do 100 mikrona u kojima je smešten 100% medicinski kiseonik. Ove kapi bivaju usmerene na površinu kože, otvarajući pore i vršeći nežnu mikrodermoabraziju. Na koži dolazi do blage eksfolijacije, stimuliše se cirkulacija, podstiče limfna drenaža.

POSTUPAK TRETMANA

- › U postupku tretmana najpre se koristi suva kupka sterilnim kiseonikom koji dubinski dezinfikuje kožu.
- › Zatim se vrši unos seruma uz pomoć sprej pištolja sa kiseonikom kako bi se unele sve potrebne aktivne supstance (serumi, peptidi, prirodni izbeljivači).
- › Na kraju tretmana se može koristiti maska, kojom se dodatno unosi čist kiseonik u organizam, čime se pospešuje stvaranje novih ćelija, detoksikacija i poboljšava proizvodnja kolagena.





PREDNOSTI DERMO OXY APARATA

- › Pretvaranjem kiseonika iz vazduha u sterilni kiseonik podstiče se intenzivna oksigenacija kože
- › Unos kiseonika zajedno sa aktivnim materijama u kožu (hijaluronska kiselina, vitamini, serumi) u najdublje slojeve kože, čime se snažno ubrzava sinteza kolagena
- › Najzdraviji i najprirodniji tretman za lice
- › Tehnologija kiseonika odmah nakon nanošenja povećava količinu atmosferskog kiseonika u koži
- › Kiseonik okrepljuje mikrocirkulaciju kože
- › Efekat druge kože – nakon nege, koža je preporučena (ružičasta, odmorna i vidno podmlađena)

EFEKTI TRETMANA

- › SJAJ I HIDRIRANA KOŽA
- › OSEĆAJ SVEŽINE I PROKRVLJENOSTI
- › LICE BEZ AKNI
- › KOŽA BEZ CRVENILA
- › MOMENTALNI SJAJ
- › DOBRO TONIRANA KOŽA

APLIKATORI ZA KISEONIK



Šifra: 0548



Šifra: 3560



KISEONIK MASKA

Plastična providna maska za tretman kiseonikom koja pokriva celo lice.

Šifra: 3400

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: DERMO OXY
 Šifra aparata: 9825
 Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz.
 Snaga: 350 W
 Osigurač: T-6,3 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Dimenzije displeja: 61x16 mm
 Broj ručica: 3
 Broj programa: 3
 Protok i gustina kiseonika: kada je protok 5 L/min, gustina je $\geq 90\%$
 Izlazni pritisak: 30 KPa 70 KPa
 Buka: ≤ 55 dB
 Normalni otpor izolacije: ≥ 100 MΩ
 Kapacitet normalnog električnog otpora: 3000 V/0.5 mA/Min 10
 Nivometar na koncentratoru kiseonika
 Režim rada: kontinuirani režim rada
 Komplet opreme: Air brush pištolj sa raspršivačem x 2 kom;
 Aplikator za kiseonik x 1 kom; Plastična maska za lice x 1 kom
 Dimenzije (dxšxv): 370x480x910 mm
 Težina: 25 kg

- LIFTING
- OČNA REGIJA
- LIFTING OSETLJIVE KOŽE
- LIFTING VRATA



APARATI ZA LICE

RF FACE TOUCH UG

RADIOTALASNI LIFTING ZA LICE

Šifra: 9878

Radiotalasna frekvencija je zasnovana na podizanju toplote tkiva, preko RTL talasa, koji podstiču prirodne procese kao što su proizvodnja kolagena i elastina i hijaluronske kiseline, što rezultira novim izgledom epiderma. Radiotalasna frekvencija aparata RF FACE TOUCH, primenjuje bipolarni način tretiranja. Zato se svrstava u neinvazivnu tehnologiju sa zavidnim rezultatima.

VISOKO TEHNOLOŠKI UREĐAJ

RF FACE TOUCH UG je sofisticiran i konfigurisan da kontroliše terapijske algoritme čime se eliminiše potreba za hlađenjem i omogućava tretman i osetljivih koža.

SOFIGICIRAN NAČIN PODMLAĐIVANJA

Toplota se putem radiotalasa akumulira u dubokim slojevima kože, sa minimalnim uticajem na površinske slojeve. Tada dolazi do intenzivne sinteze kolagena, elastina i njihovog ponovnog zatezanja.

PRIJATNA I KOMFORNA TERAPIJA

Tretman RF FACE TOUCH UG je podesan za lice i uključuje bore i linije oko očiju, spuštene kapke, kesice oko očiju, fine bore čela i lica, opušteno obraze, podbradak, vrat i dekolte.

SIGURNA TEHNOLOGIJA ZA SVE TIPOVE KOŽE

Tretmani RF FACE TOUCH UG, za razliku od tretmana svetlosnim izvorom, nisu zasnovani na apsorpciji svetlosti i melaninu i zato su sigurni i za tamnije tipove kože.

PRIKAZ EKRANA



Tehničke karakteristike:

Naziv aparata: RF FACE TOUCH UG
 Šifra: 9880
 Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz
 Snaga aparata: 50 W
 Izvor energije: Radiofrekvencija
 Frekvencija: 1 MHz
 Broj sondi: 1
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF
 Dimenzije aparata (dxšxv): 320x400x200 mm
 Težina aparata: 4 Kg

- LIFTING LICA
- OČNA ZONA- KAPCI
- LIFTING OSETLJIVE KOŽE
- TURGOR KOŽE



APARATI ZA LICE

RF DYNAMIC FACE

RADIOTALASNI LIFTING ZA LICE

Šifra: 5062

PRINCIP DELOVANJA

RF DYNAMIC FACE je uređaj koji koristi radiofrekvenciju lica, obezbeđujući sposobnost efikasnog delovanja na nepravilnostima prisutnim na različitim dubinama kože.

Kroz sofisticirani elektronski system RF DYNAMIC FACE prenosi toplotu u dublje slojeve kože, bez oštećenja epiderma, pružajući mlađi i zategnutiji izgled kože.

Ova metoda koristi se za estetske probleme poput bora, spuštenih kapaka, kesica oko očiju, duple brade i bora vrata. Takođe se tretira opuštena koža dekoltea.

Proizvedena toplota uzrokuje porast količine kiseonika koja se prenosi do tkiva, ubrzava metabolizam ćelija i podstiče proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, obezbeđujući efekat podizanja i progresivnog zatezanja kože.

EFEKTI

Sa radnim sistemom RF DYNAMIC FACE mogu se izvesti tretmani lica koji omogućavaju efekat vidljiv na linijama bora i celoj površini lica gde je opuštanje kože prisutno.

Učestalost plasiranja toplote radiotalasa, omogućava bolju cirkulaciju krvi, vraćajući energičnost mišićima lica.

Tretman je prijatne toplote i preporučuje se osobama sa početnim ili vidnim naznakama opuštenog lica, bora, palog tonusa mišića lica.

PREDNOSTI

- > Energija 50 w/cm²
- > Sonda multipolar sa ravnomernom toplotom u dubljim slojevima tkiva
- > Definisane programske procedure za lice

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 8091

Tehničke karakteristike:

Naziv aparata: RF DYNAMIC FACE
 Izvor energije: radiofrekvencija
 Šifra aparata: 5062
 Izlazna snaga: max 50 W
 Izlazna snaga male ručice: 110 V
 RF frekvencija: 1 MHz
 Radna temperatura: -10 do 40°C
 Napajanje: 220-240V, 50-60 Hz
 Dimenzije (dxšxv): 320x400x200 mm
 Težina: 4 kg

- **RADIOTALASNI LIFTING**
duboka regeneracija i zatezanje kože
- **MEZOPORACIJA**
unos aktivnih materija u dublje slojeve kože



APARATI ZA LICE

MEZO RF LIFT

MEZOPORACIJA I RADIOTALASNI LIFTING

Šifra: 9096

RADIOTALASNI LIFTING

EFEKAT ZATEZANJA

Radiotalasni lifting je danas najnapredniji sistem za postizanje odličnih rezultata i smanjenje nepravilnosti koji utiču na površinski deo kože kao što su bore, znaci starenja, opuštena koža, strije.

DEJSTVO REGENERACIJE

Ovaj tretman koristi proces dijatermije, koji omogućava vazodilaciju i povećava dotok kiseonika ka tkivima, ubrzava ćelijski metabolizam i stimuliše proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, čineći kožu elastičnom i čvrstom.

MEZOPORACIJA

UNOS AKTIVNIH MATERIJU U DUBLJE SLOJEVE

Metoda mezoporacije primenjuje pulsne jednosmerne struje koje stvaraju elektromagnetno polje, koje otvara privremene kanale (mezopore) u lipidnom sloju između epiderma i derma i time omogućava prolaz aktivnih supstanci u žive slojeve kože.

KOMBINACIJA TEHNIKA 2 METODE

- > Dugotrajan efekat usled kombinovanja komplementarnih tehnika
- > Istovremeno uklanjanje starenja i usporavanje procesa starenja

PRATEĆA OPREMA



Šifra: 9026



Šifra: 9095



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: MEZO RF LIFT

Šifra aparata: 9096

Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz

Snaga: 110 W

Kućište: Polystyrol

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Broj sondi: 2

Broj programa: 5

Izvor energije: radiofrekvencija i jednosmerni impulsni napon

Oblik impulsa: četvrtasti, 500 ms

Dimenzije (dxšxv): 345x270x135 mm

Težina: 2 kg



APARATI ZA LICE

MEZO RF LIFT TOUCH UG

MEZOPORACIJA I RADIOTALASNI LIFTING

Šifra: 9870

RADIO FREKVENCIJA


DEJSTVO REGENERACIJE

Ovaj tretman koristi proces dijatermije, koji omogućava vazodilaciju i povećava dotok kiseonika ka tkivima, ubrzava ćelijski metabolizam i stimulise proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, čineći kožu elastičnom i čvrstom. U zavisnosti od problematike, najoptimalniji rezultati se postižu kombinovanjem komplementarnih tehnika (tretmana), jer više dobrih tehnika umnožava i rezultate rada. Tu se prvenstveno misli na kombinaciju mezoporacije i radiotalasnog liftinga, gde ne samo da se uklanjaju znaci starenja i propadanja kože, već se i usporava sam proces starenja, što i jeste krajnji cilj kada govorimo o nehirurškim metodama podmlađivanja.

MEZOPORACIJA

Tretman u kome se primenjuje tehnika unosa aktivnih materija u dublje slojeve kože, u sistemu prilagođenih strujnih impulsa, koji deluju brzo, efikasno i ciljano na mesta gde je potrebno izvršiti popravljjanje strukture kože.

PRIKAZ EKRANA

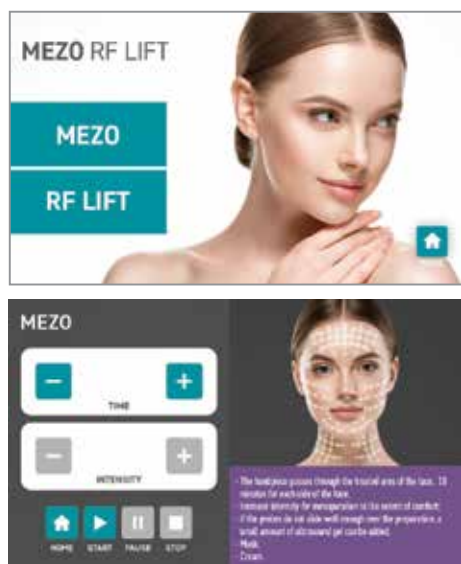

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: MEZO RF LIFT TOUCH UG

Šifra: 9870

Režim rada: 220-240 V AC; 50/60 Hz

Snaga aparata: 50 W

Izvor energije: radiofrekvencija i jednosmerni impulsni napon

Frekvencija radiofrekvencije: 1 MHz

Broj sondi: 2

Broj programa: 5

Oblik impulsa: četvrtasti, 500 ms

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: CLASS I, TYPE BF

Kućište: polistirolo

Dimenzije aparata (dxšxv): 320x400x200 mm

Težina aparata: 8 kg

- UKLANJANJE I SMANJENJE BORA
- OTKLANJANJE HIPERPIGMENTACIJE
- LIFTING, ZATEZANJE I PODMLADJIVANJE KOŽE
- DUBINSKA HIDRATACIJA



APARATI ZA LICE

MEZO SKIN EP

TRETMAN MEZOPORACIJE

Šifra 9081

Mezoporacija je proces sa kojim molekuli mogu proći kroz lipidnu ćelijsku membranu. Pomoću ovog tretmana otvaraju se hidrofilni kanali čija je funkcija da omogući prolaz malih molekula jona u dublje slojeve kože. Mezopore se otvaraju i primaju aktivne supstance, tj. kozmetičke preparate i lekove. Najčešće se koristi u kozmetici. Mezoporacijom se unose hijaluron, kolagen, vitamin C. Ove supstance se prirodno nalaze u koži, ali starenjem se gube i koža gubi elastičnost.

Aparat MEZO SKIN EP se koristi u profesionalnoj estetici kao sposobnost delovanja pulsne struje da poveća propustljivost tkiva za kozmetičke preparate. Elektroporacija ima kraću primenu nego tradicionalna jonoforeza i apsolutno je bezbolna i omogućava kontrolisan prenos velikih količina aktivnih supstanci. Pored kvalitetne tehnologije, od izuzetnog značaja je ispravna upotreba metode i korišćenje namenskih kozmetičkih proizvoda, posebno kreiranih da povećaju efikasnost tretmana.

U zavisnosti od problematike, najoptimalniji rezultati se postižu kombinovanjem komplementarnih tretmana, jer više dobrih tehnika umnožava i rezultate rada. Tu se prvenstveno misli na kombinaciju mezoporacije i radiotalasnog liftinga, gde ne samo da se uklanjaju znaci starenja i propadanja kože, već se i usporava sam proces starenja, što i jeste krajnji cilj kada govorimo o nehirurškim metodama podmlađivanja.

MESO SKIN EP je aparat u kome se primenjuje tehnika mezoporacije u sistemu prilagođenih strujnih impulsa, koji deluju brzo, efikasno i ciljano na mesta gde je potrebno izvršiti popravljane strukture kože.

INOVATIVAN KONCEPT SONDI

Bipolarna sonda za MEZO SKIN EP konstruisana je da optimalno i dozirano unosi mezo preparat, bez prekomerne potrošnje.



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: MESO SKIN EP
 Šifra proizvoda: 9081
 Napajanje: 220-240 V AC
 Frekvencija: 50/60 Hz
 Snaga: 100 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj sonde: 1
 Broj programa: 1
 Oblik struje: jednosmerna 1-16 mA
 Oblik impulsa: četvrtasti, 500 ms
 Dimenzije (dxšxv): 195x245x125 mm
 Težina: 1,6 kg

- INTEGRISANI TAJMER SA SIGNALNIM TOKOM DVOMINUTNOG TAKTA
- IZBOR TRETMA NSKE DOZE U 5 RAZLIČITIH UNAPRED PROGRAMIRANIH VREDNOSTI
- IZBOR FREKVENCIJE TRETMA NA U 5 RAZLIČITIH UNAPRED PROGRAMIRANIH VREDNOSTI
- IZBOR OBLIKA STRUJE – BLAGA
- IZBOR OBLIKA STRUJE – INTENZIVNA



APARATI ZA LICE

FACE LIFT MASK

LIFTING TRETMAN

Šifra 9828

FACE LIFT MASK je prijatan i efekatan tretman. On koristi novi oblik talasa koji omogućava tretman mišićnih vlakana na izuzetno delikatan način. Ova tehnologija proizvodi kontrakcije koje doprinose fiziološkom toniranju i drenaži kože.

DRENAŽNA MASAŽA

Drenažna masaža dejstvuje zahvaljujući mešavini stimulišućih struja sa dejstvom toniranja i drenaže, poboljšavajući elastičnost mišića i tkiva i omogućavajući eliminaciju suvišnih tečnosti i toksina. Novi oblik talasa proizveden u laboratorijama VECOM-a, čini drenažnu masažu efektivnom i prijatnom.

TONIFIKACIJA

Tretmani mišićne stimulacije imaju za cilj da selektivno stimulišu opuštena mišića da bi se dobilo učvršćivanje i efekat preoblikovanja mišića lica.

JAČANJE MIŠIĆA LICA

Elektrostimulacija selektivno deluje na grupe mišića omogućavajući oblikovanje željenih oblasti.

FACE LIFT MASK ne zavisi od strujne mreže i proizvodi tačno proračunatu mikrostruju, potrebnu za stimulaciju svakog mišića lica. Stimulacija strujom je potpuno bezbolna. Upotrebom ovog miolift sistema, svaki mišić biva iznova programiran. Rezultat – uspavani mišići ojačavaju što rezultira trenutnim zatezanjem kože.

Ovom metodom korišćenja ostvaruje se i stimulacija krvnog toka i brže izbacivanje štetnih materija. Poboljšava se tonus mišića i delotvorno otklanja suvoća kože.



Tehničke karakteristike

Naziv proizvoda: FACE LIFT MASK
 Šifra proizvoda: 9828
 Režim rada: 230 V AC; 50/60 Hz
 Snaga: 100 W
 Kućište: Polystyrol
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj elektroda: 6
 Broj programa: 2
 Max izlazna struja: 23 mA
 Frekvencija: 0,24-3,6 kHz
 Dimenzije (dxšxv): 450x320x175 mm
 Težina: 4 kg



APARATI ZA LICE

LIFTING M-BEAUTY

LIFTING TRETMAN

Šifra 4051

Aparat LIFTING M-BEAUTY postiže efekat liftinga kroz pojačanu aktivaciju mišića i mikrocirkulaciju.

Digitalni miolift ne zavisi od strujne mreže i proizvodi tačno proračunatu biostruju, potrebnu za stimulaciju mišića lica.

Ovom metodom korišćenja ostvaruje se stimulacija krvnog toka i brže izbacivanje štetnih materija.

Poboljšava se tonus mišića i delotvorno otklanja suvoća kože.

FAZA 1: RELAKSACIJA

FAZA 2: REGENERACIJA

FAZA 3: STIMULACIJA I ZATEZANJE MIŠIĆA

SPECIFIČNOSTI APARATA

- › INTEGRISANI TAJMER SA SIGNALNIM TOKOM DVOMINUTNOG TAKTA
- › IZBOR TRETMANSE DOZE U 5 RAZLIČITIH UNAPRED PROGRAMIRANIH VREDNOSTI
- › IZBOR FREKVENCIJE TRETMANA U 5 RAZLIČITIH UNAPRED PROGRAMIRANIH VREDNOSTI

PRATEĆA OPREMA



Šifra 4051RL



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: LIFTING M-BEAUTY
 Šifra proizvoda: 4051
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Snaga: 110 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Kućište: polistirol
 Broj ručica: 2
 Broj programa: 2
 Max izlazna struja: 23 mA
 Amplituda: 2-20 mA
 Napon izlazni stepen: 6-64 Vpp
 Dimenzije (dxšxv): 450x320x175 mm
 Težina: 4 kg

- FINE BORE NA LICU
- OŽILJCI OD AKNI
- SLABO PROKRVLJENA KOŽA
- PROŠIRENE PORE



APARATI ZA LICE

DEEP CLEAN

DIJAMANTSKA MIKRODERMOABRAZIJA

Šifra 4052

Postizanje mladalačkog izgleda kombinovanjem dubinske masaže vakuuma i dijamantske dermoabrazije, značajno se povećava mikrocirkulacija i propusnost kapilara, što omogućava znatno bilju oksigenaciju kože i bolji metabolizam. Značajno se poboljšava i hidratacija izvan ćelijskog prostora, čime se ubrzava i osigurava pravilan rast fibroblasta, odnosno jača obnova kolagenih i elastičnih vlakana, poboljšava tonus kože i jača muskulatura.

INDIKACIJE ZA TRETMAN DERMOABRAZIJE

Ublažavanje ožiljaka, smanjivanje pora, pročišćavanje tena. Dijamantskom dermoabrazijom mogu se umanjiti duboki ožiljci i dubina samih pora, i omogućiti stvaranje novih ćelija i regeneracija oštećenog tkiva. Odstranjivanjem orožnalog površinskog sloja, koža se pročišćava jer se pore dubinski čiste od nakupljenog sebuma i nečistoća, a zbog bolje prokrvljenosti uspostavlja se optimalni dotok hrane i kiseonika, kao i odvod limfe, pa se umanjuje mogućnost stvaranja novih akni.



UKLANJANJE HIPERPIGMENTACIJA

Ovom metodom mogu se otkloniti fleke od sunca, staračke fleke, hiperpigmentacija kao posledica akni i druge diskoloracije uzrokovane drugim zdravstvenim poremećajem.



Tehničke karakteristike

Naziv proizvoda: DEEP CLEAN

Šifra: 4052

Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Snaga: 100 W

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Kućiste: Polystirol

Komplet sadrži: Komplet nastavaka za dermoabraziju: 3 držača i 9 nastavaka

Nastavci za dermoabraziju: 6 mm D-200, 8 mm D-150, 14,5 mm D-100, 14,5 mm D-150, 14,5 mm D-200, 18,5 mm D-75, 18,5 mm D-150, 23 mm D-75, 23 mm D-150

Držači nastavaka od nerđajućeg čelika

Max. vakuum: 800 mbar

Max. pritisak: 2,5 bar

Max. protok: 22 LPM

Dimenzije (dxšxv): 345x280x235 mm

Težina: 2 kg



APARATI ZA LICE

BIOLASER 100mW DS FACE & BODY

SNAŽNA TEHNIKA SVETLOSNE TERAPIJE

Šifra 8103

Biološki rezultati tretmana crvenim laserom blagotvorno deluju na poboljšanje krvotoka i pojačanje ćelijske razmene, kao i na smanjenje upalnih procesa antibakterijskim delovanjem. Laserom se ubrzava metabolizam i deoba ćelija, a zbog stimulacije nastanka anti-tela poboljšava se imunološki sastav organizma. Laser 100mW omogućava pojačanu sintezu kolagena i sintetsku aktivnost fibroblasta, i kao takav značajno utiče na podmlađivanje.

TERAPIJSKI EFEKTI LASERA

Laser stimuliše sintezu kolagena ubrzavajući tako zarastanje rana, ublažava bol (deluje analgetski), smanjuje otroke, smanjuje ožiljke, ima biološko dejstvo i povoljno deluje na imunološki sistem.

Snagom od 100mW biolaser, omogućava se brz i učinkovit efekat:

- > Povećanje bioenergetskog metabolizma
- > Efekat protiv upale
- > Efekat protiv otoka
- > Stimulacija mikrocirkulacije
- > Regeneracija tkiva
- > Efekat protiv bola

PRIMENA LASERA

- > Koža sklona aknama
- > Ožiljci kao posledica akni
- > Alopecija
- > Podočnjaci sa kesicama
- > Herpes simplex/zoster
- > Tretmani podmlađivanja
- > Opekotine
- > Kuperroza

PROGRAMI

- > AKNE
- > OŽILJCI
- > EDEMI
- > ROZACEA
- > ALERGIJE
- > BORE
- > HERPES
- > PUSTULOZNE AKNE
- > UPALNI PROCESI
- > RANE



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: BIOLASER DS 100mW FACE & BODY
 Šifra proizvoda: 8103
 Napajanje: 220-240 V AC; 50/60 Hz
 Snaga: 100 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj sondi: 1
 Broj programa: 12
 Max izlazna snaga: 100 mW
 Tip lasera: poluprovodnička dioda
 Režim rada: kontinualni i pulsni
 Aktivni medij: poluprovodnički
 Dimenzije (dxšxv): 345x280x235 mm
 Težina: 2,2 kg

- LIFTING
- AKNE
- KUPEROZA
- HIPERPIGMENTACIJA
- PILING
- ČIŠĆENJE KOŽE
- HIDRATACIJA



APARATI ZA LICE

ULTRASONIC SKIN SYSTEM

Šifra 8104

ULTRAZVUČNI PILING LICA

Osim pilinga kože i dubinskog čišćenja epidermisa, ovim tretmanom se utiče na hidrataciju, tonus, cirkulaciju i diskoloraciju kože. Na pravilan način se omekšavaju kavernozna vlakna i tako se epiderm priprema za bolju apsorpciju preparata za negu lica koji se mogu uneti uz pomoć špatule. Tretman se osim za redovno čišćenje lica preporučuje kao uvodni tretman u tretmane podmlađivanja. Rezultat je trenutno vidljiva čistoća, zategnutost i osveženje, kao i bolja prokrvljenost i vlažnost kože.

REZULTATI SU MOMENTALNO VIDLJIVI

Dejstvom elastičnih mikro-vibracionih talasa sprovode se četiri bazična modaliteta dejstva: precizno se eksfolira stratum corneum, vrši temeljno čišćenje kože, koža se hidrira, poboljšava cirkulacija i vrši oksigenacija, uz istovremeno obnavljanje i rejuvenaciju kože.

KAKO SE RADI ULTRAZVUČNI PILING?

Aparat ultrazvučnom vibracijom izbacuje komedone iz kanala, takođe u isto vreme uklanja se tanak sloj površnih mrtvih ćelija kože lica. Nakon što se završi sa ovim tretmanom, na lice se stavlja maska koja umiruje, hrani kožu i skuplja proširene pore. Tretman je apsolutno bezbolan i prijatan, traje oko 30 minuta. Nakon ultrazvučnog pilinga nema crvenila kože. Može se nesmetano nastaviti sa dnevnim aktivnostima.

KOŽA RAVNOG, GLATKOG TENA

ULTRASONIC SKIN SYSTEM nudi funkcije koje balans kože podižu na viši nivo, rezultirajući briljantnim tenom. Akumulacije pigmenta i manji ožiljci koji su posledica raznih nedostataka mogu biti poravnati i izgladeni serijom tretmana. Koristeći kombinaciju fizičko-mehaničkih procesa i odgovarajućih proizvoda za negu kože, postiže se redukcija diskoloracije i poboljšava ten.



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: ULTRASONIC SKIN SYSTEM
 Šifra proizvoda: 8104
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Snaga: 110 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj ručica: 1
 Broj programa: 4
 Kućiste: Polystirol
 Maksimalna izlazna snaga: 5 W efektivna
 Maksimalna iz. frekvenca: 25 KHz
 Izlazna galvanska struja: 10 mA
 Tajmer: 1-30 min
 Dimenzije aparata dxšxv: 345x280x235 mm
 Težina: 2 kg

- ENERGIJA FOTONA ZA OBNAVLJANJE KOŽE
- SUZBIJANJE UPALNIH PROCESA
- POVEĆANJE ELASTIČNOSTI KOŽE
- ULTRAZVUČNA EKSFOLIJACIJA



APARATI ZA LICE

ULTRAPEEL & PDT LED

Šifra 9089

ŠTA JE PDT LED TRETMAN?

Za izraz svetlosna terapija je uvedena skraćenica LLLT (Low Level Light Therapy) što bismo mogli da prevedemo izrazom terapija koja se izvodi niskoenergetskim izvorima svetlosti.

CRVENO SVETLO NA 640 NM

PLAVO SVETLO NA 470 NM

ZELENO SVETLO NA 560 NM

ULTRAZVUČNA ŠPATULA

Neinvazivna, usavršena metoda pilinga kojom se postiže nežna, ravnomerna i kontrolisana eksfolijacija, a sama koža postaje glatka i blistava da zrači.

DELOVANJE Ultrazvučne špatule i LED tretmana

1. Ravnomernom eksfolijacijom postiže se bolja priprema lica za efekat led svetla
2. Ujednačena boja i struktura kože, svež i podmlađen izgled



PLAVO SVETLO – Deluje tako da suzbija upalne procese na koži i pozitivno deluje na smanjenje akni. Plavo svetlo može da uništi bakterije bez povrede kožnog tkiva. Ono smanjuje broj akni u najvišoj mogućoj meri.

CRVENO SVETLO – izbeljivanje i ublažavanje diskoloracije i otoka na koži, smanjenje bora, oporavak oštećene kože, lečenje sitnih bora i ožiljaka, zatezanje pora i razmnožavanje belančevina kolagena.

ZELENO SVETLO – Ima svojstva neutralizacije to jest deluje tako da sjedinjuje baze i kiseline, obnavlja balansiranje i umiruje upale. Može da olakša zatezanje kože, pročisti limfu i limfne kanale, pa se koristi prilikom eliminacije edema odnosno nateklina.

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: ULTRAPEEL & PDT LED

Šifra proizvoda: 9089

Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Snaga: 110 W

Kućiste: Polystirol

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Kućiste: Polystirol

Dimenzije displeja: 62x16 mm

Broj sondi: 2

Broj programa: 5

Maksimalna izlazna snaga: 5 W efektivna

Maksimalna iz.frekvenca: 25 KHz


Tajmer: 1-30 min

Dimenzije (dxšxv): 195x240x12 5mm

Težina: 3 kg

APARATI ZA LICE

DARSONVAL AS

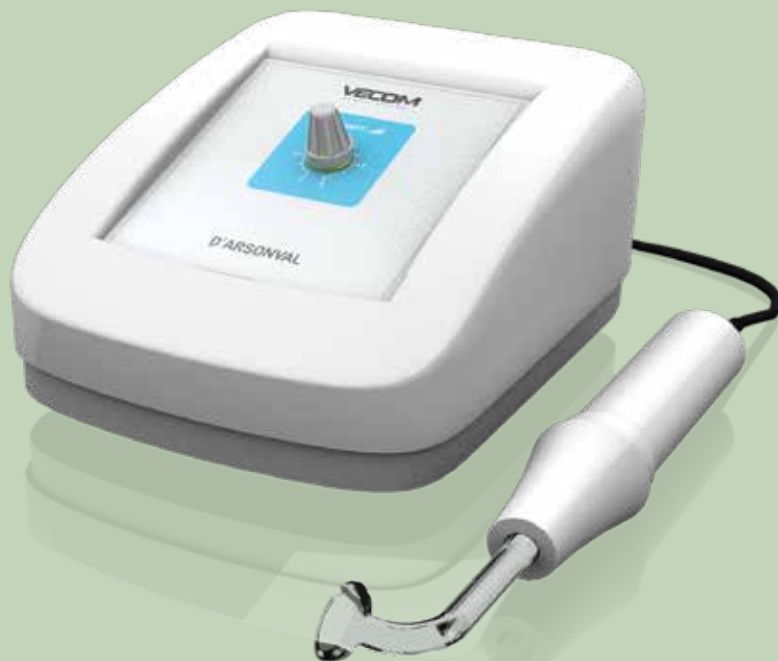

Šifra 2028

ELEKTRIČNO DEJSTVO

Po koži povećava površinsku cirkulaciju, ubrzava proces razmene produkata, pospešuje penetraciju kozmetičkih preparata, dovodi do zarastanja rana, dezinfikuje kožu, vrši mikro masažu i stvara ozon koji uz ultraljubičasto svetlo takođe deluje antibakterijski.

DEZINFЕКЦИОНО SVOJSTVO

Podrazumeva uništavanje bakterija i ostalih mikroorganizama sa površine kože za koje se zna da mogu biti izazivači mnogih oboljenja i infekcija.

Isušujuće dejstvo utiče na normalizaciju lučenja lojnih žlezda.

STIMULATIVNO DEJSTVO

Ukoliko je koža klijenta sa narušenom (slabom) funkcijom krvotoka, jedna od radnji koja će omogućiti bolju cirkulaciju jeste primena darsonvalizacije. Problem narušenog krvotoka, kako usporenog tako i prenatlaženog, dovodi do poremećaja metabolizma. Darsonvalizacijom se postiže sklad metabolizma i eliminacija toksina. Na taj način koža se vitalizira.

PRATEĆA OPREMA



Šifra 0730



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: DARSONVAL AS
Šifra proizvoda: 2028
Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Snaga: 100 W
Osigurač: T-1 A
Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
Kućište: Polystirol
Broj ručica: 1
Broj elektroda: 1 (pečurkastog oblika)
Maksimalna frekvencija 200 KHz
Maksimalni izlazni napon: 40 KVpp
Dimenzije (dxšxv): 195x240x125 mm
Težina: 1,5 kg



APARATI ZA LICE

DARSONVAL PORTABL

Šifra 6627

STIMULACIJA POVRŠINE KOŽE

HF struja prodire do subkutanog tkiva stvarajući toplotu koja povećava razmenu tečnosti u tkivu. Poboljšanjem ishrane kože i eliminacijom štetnih produkata stvara se bolji odnos vlage i masnoće.

RELAKSACIJA

Toplota nastala u tkivu kože primenom HF struje stvara se osećaj opuštenosti. HF struja (indirektna metoda) protiče kroz površinu tela i zbog brzine oscilacije ne pobuđuje mišićna tkiva.

GERMICIDNI I ISUŠUJUĆI EFEKAT

Direktnom primenom HF struje na površini kože stvara se germicidni i antibakterijski efekat, ograničavajući na taj način pojačano delovanje lojnih žlezda. Time se isušuje površinski sloj kože što doprinosi lečenju pustularne infekcije.



Tehničke karakteristike

Naziv proizvoda: DARSONVAL PORTABL

Šifra proizvoda: 6627

Režim rada: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Snaga: 10 W

Potenciometar za uključivanje i isključivanje i za podešavanje intenziteta struje

Utičnica za priključivanje staklenih elektroda

Set aparata sadrži: Ručica HF struje + 4 staklene elektrode (pečurka, špatula, zakrivljeni štapić i češalj)

Dimenzije: 25x5 cm

Dužina napojnog kabla: 2 m

Težina: 0,5 kg

- UNOS HRANLJIVIH BIOAKTIVNIH I LEKOVITIH SUPSTANCI
- REGENERACIJA I OSVEŽENJE KOŽE



APARATI ZA LICE JONOS AS 10

Šifra 2025

Jonos se koristi kod unošenja aktivnih vodenih rastvora ampula i lekova putem galvanske struje. Primjenjuje se kod unosa vitamina, oligomineralnih ampula, placente, proteina, kalcijuma, magnezijuma, kolagena, elastina.

Efikasnost procesa unošenja jonizovanih materija preko kože zavisi od koncentracije jonizovanih materija koji se unose, jačine primljene struje, trajanja aplikacije i površine elektroda.

Od vodenih ampula koje se koriste u tretmanu jonoforezom:

- > ampule oligoelemenata
- > žele rojal ampule (matični mleč) – za vraćanje glatkoće i mekoće kod atrofne kože
- > proteinske ampule (kolagen, elastin)
- > vitaminske ampule – sadrže vitaminske komplekse za osveženje
- > aloe vera ampule – za problematičnu kožu
- > kolagen ampule – za popravljivanje elastičnosti i intenziviranje produkcije vezivnog tkiva
- > bilirubin ampule (blagotvorne kod kuperoze)
- > placenta ampule – za stimulaciju kože u procesu starenja
- > aloja ampule – za problematičnu kožu

DEJSTVO

- AKTIVIRANJE METABOLIČKIH PROCESA U KOŽI
- POBOLJŠANJE RESORPCIJE AKTIVNIH MATERIJ



Tehničke karakteristike

Naziv aparata: JONOS AS10
 Šifra proizvoda: 2025
 Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
 Snaga: 100 W
 Osigurač: T-1 A
 Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
 Broj ručica: 1
 Elektrode: 2 kom (valjak, štikaljka)
 Max izlazni napon: 0-21 VD
 Max izlazna struja: 0-1 mA, 0-10 mA
 Promena polariteta: + / -
 Dimenzije (dxšxv): 195x240x125 mm
 Težina: 1,3 kg



APARATI ZA LICE JONOS AS 30

Šifra 2025/1

Metoda jontoforeze je zastupljena kao veoma efikasan postupak u lečenju hiperhidroze dlanova i stopala, koja ima potpunu normalizaciju stanja u preko 90% slučajeva.

Aparat JONOS AS30 provodi jednosmernu struju sa pozitivnog ili negativnog polariteta. U plastične kadice se postavljaju specijalne elektrode uvučene u mokre sušeraste navlake, na koje se postavljaju dlanovi ili stopala, dodaje se manja količina vode i postepeno se pojačava intenzitet struje do osećaja peckanja.

Tretman se radi 15-tak minuta sa jednog polariteta, a zatim sa drugog. Prebacivanje polariteta se radi preko tastera.

Ovakav tretman dovodi do interakcije između električne struje, kretanja jona sa jednog i drugog polariteta i PH vode, koji blokira rad znojnih žlezda.

DEJSTVO

- BLOKIRANJE RADA ZNOJNIH ŽLEZDA
- PRODUŽENA SUVOĆA DLANOVA, STOPALA, PAZUHA

PRATEĆA OPREMA



Šifra 8089/5



Šifra 0788



Šifra 9076

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: JONOS AS30

Šifra proizvoda: 2025/1

Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Snaga: 100 W

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Broj elektroda: 2 gumeno-grafitne elektrode + 2 sušeraste navlake za elektrode

Intenzitet struje: 1-10 mA

Promena polariteta: + / -

Izlazni napon: 33 V

Dimenzije (dxšxv): 195x240x125 mm

Težina: 1,8 kg

DEJSTVO

- › AKTIVIRANJE METABOLIČKIH PROCESA U KOŽI
- › POBOLJŠANJE RESORPCIJE AKTIVNIH MATERIJA



APARATI ZA LICE

JONOS - DARSONVAL

Šifra 2027

JONOS

- › UNOS HRANLJIVIH BIOAKTIVNIH SUPSTANCI
- › REGENERACIJA I OSVEŽENJE KOŽE

DARSONVAL

- › DEZINFEKCIONO
- › ISUŠUJUĆE
- › STIMULATIVNO
- › POSPEŠUJUĆE

KOMBINOVANOM TEHNIKOM GALVANSKE I HF STRUJE POSTIŽU SE DOBRI EFEKTI ČIŠĆENJA, OBNAVLJANJA I REGENERACIJE KOŽE

JONOFOREZA

Neorganske i neke organske soli se razlažu u vodenom rastvoru na pozitivno naelektrisane jone – katjone i negativno naelektrisane jone – anjone. Prolaskom jednosmerne struje kroz ovakve rastvore dolazi do njihove polarizacije. Pozitivni joni katjoni kreću se ka anodi, a negativni joni anjoni (-) kreću se ka katodi u strujnom kolu. Ova sposobnost galvanske struje - JONTOFOREZA, našla je praktičnu primenu za unošenje polarizovanih hranljivih i lekovitih materija preko kože u ljudski organizam.



DARSONVAL je aparat čija je osnovna namena dubinska dezinfekcija kože i normalizacija lučenja lojnih žlezda.

Uz aparat se koriste staklene elektrode različitog oblika prema regiji primene.

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: JONOS-DARSONVAL

Šifra proizvoda: 2027

Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Snaga: 100 W

Osigurač: T-1 A

Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF

Broj ručica: 2

Broj elektroda: 2 (valjak, štipaljka)

Broj programa: 2

Jonos:

Max izlazni napon: 0-21 VD

Max izlazna struja: 0-1 mA, 0-10 mA

Jonos elektrode: 2 kom (valjak i štipaljka)

Darsonval:

Max frekvencija: 200 KHz

Max izlazni napon: 40 KVpp

Darsonval elektroda: 1 kom (pečurka)

Dimenzije (dxšxv): 345x245x125 mm

Težina: 2 kg

APARATI ZA LICE

VAPOZON FM - 601



Šifra 6444

VAPOZON FM-601 je aparat dizajniran da deluje na nesavršenosti lica, vrata i dekoltea, uređaj sadrži inovativnu tehnologiju za čišćenje, oksigenaciju, toniranje i tretmane. Ozon ima efikasno antibakterijsko delovanje uz sposobnost da utiče na optimalnu pH vrednost kože. U zavisnosti od indikacije, koristi se odgovarajuća snaga.

FUNKCIJE

- > Otvaranje pora na koži za dubinsko čišćenje iznutra
- > Jonizovano dejstvo vodene pare
- > Dejstvo eteričnih ulja i biljnih ekstrakata u smeši sa vodenom parom
- > Aktivacija cirkulacije krvi, poboljšanje metabolizma i obnavljanje kože
- > Delovanje na problematičnu i inficiranu kožu

KARAKTERISTIKE:

- > Kućište: prohrom
- > Vremensko podešavanje tretmana
- > Podešavanje intenziteta vodene pare
- > Alarmni sistem za maksimalni i minimalni nivo vode

PRATEĆA OPREMA



Šifra 3050

Tehničke karakteristike

Naziv aparata: VAPOZON FM-601
Šifra proizvoda: 6444
Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Snaga: 800 W
Zaštitna klasa IEC60601/1: Class I, Type BF
Plastična posuda prečnika 11,5 cm, visina: 13,5 cm
Podesiva visina
Podesiva ručica vapozone
Dimenzije (dxšxv): 240x250x800 mm
Težina aparata: 6,5 kg



APARATI ZA LICE **TERMO MASKA**

Šifra 8092



Termo maska se koristi za boljšo absorpcijo pakovanja, zagrevanje lica, otvaranje pora.

DELOVANJE

- › POSPEŠUJE ZAGREVANJE KOŽE
- › POBOLJŠANO DEJSTVO BILJNIH PAKOVANJA
- › OTVARANJE PORA I PRIRPEMA LICA ZA TRETMANE

Kontrola temperature do 45°C.



Tehničke karakteristike

Naziv proizvoda: TERMO MASKA
Šifra proizvoda: 8092
Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Snaga: 80 W
Temperatura: 45°C
Težina: 0,3 kg



- > Tip proizvoda: UVELIČAVAJUĆA LUPA
- > Šifra proizvoda: 6740
- > Konstrukcija: Metalna
- > Snaga sijalice: 22 W – G10 q
- > Lampa: Fluorescentna, 210 mm
- > Starter: 4/80 W
- > Kondenzator: 0,1 μ F
- > Zaštitni poklopac
- > Sočivo: dioptrija 5
- > Napajanje: 220-240 V AC
- > Dvostruko izolovani strujni kabl: 3 x 0,75 x 1,90 m
- > Dužina (opružena): 1300 mm
- > Dužina (od zgloba do sočiva): 800 mm

APARATI ZA LICE

KOZMETIČKA LUPA HROM LUX



Šifra 6740

- > Napon: 220-240 V AC
- > Snaga: 6 W
- > Jačina svetlosti: 560 lm
- > Boja svetlosti: 6500 K (dnevna svetlost)
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > Uvećanje: 5 dioptrija (2.25 puta)
- > Struja: 32 mA
- > Potrošnja električne energije: 6 kWh
- > Dimenzije: 990x200 mm
- > Izvor svetlosti: SMD LED 60 kom
- > Vreme zagrevanja: 0.5 s
- > Broj ciklusa uključanja/isključanja: 10.000
- > Radni vek: 20.000 h
- > Materijal kućišta: plastika i metal
- > Radna temperatura: -5 do +40°C

APARATI ZA LICE

KOZMETIČKA LED LUPA



Šifra 6425

- > Metalna konstrukcija
- > Broj točkića: 5
- > Visina: 770 mm
- > Šraf za zatezanje

APARATI ZA LICE

STALAK ZA KOZMETIČKU LUPU



Šifra 8090/1

WELLNESS & EQUIPMENT



LEŽAJ TRODELNI 4D

Šifra 216



LEŽAJ DVODELNI 4D

Šifra 215



LEŽAJ MULTIEXCLUSIVE - 2 motora

Šifra 320



WELLNESS EXCLUSIVE
elektropodesivi dvodelni ležaj

Šifra 226

WELLNESS & EQUIPMENT

Ležajevi i stolice

Aparati za toplu i hladnu depilaciju

Police

Aparati za sterilizaciju pribora



WELLNESS CONCEPT

WELLNESS EXCLUSIVE

ELEKTROPODESIVI ČETVORODELNI LEŽAJ

Šifra 227

Wellness exclusive pruža jedinstvenu prilagodljivost i mobilnost ležaja, unapred predviđene pozicije koje su vešto koordinirane s relevantnim tretmanom.



Elektromotorima se podešava visina i uzglavlje ležaja

Svojim karakteristikama pruža maksimalnu udobnost klijentima. Pored toga, terapeut ima idealne ergonomske uslove da učini posao prijatnijim i umanjí fizički napor.

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE

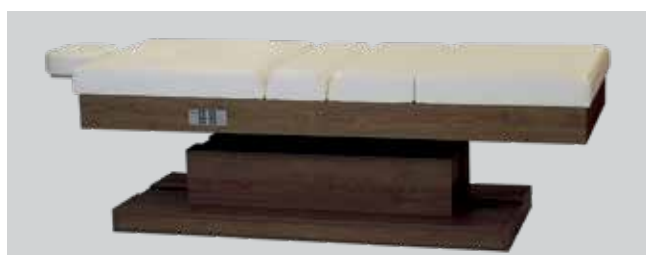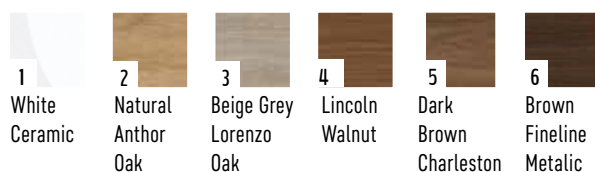

Tehničke karakteristike

Kategorija	Wellness
Primena	Wellness masaža
Masaža - Fitnes	Da
Pogon	2 motora
Daljinski upravljač	Da
Dužina	1920 mm
Širina	750 mm
Težina	100 kg
Minimalna visina	670 mm
Maksimalna visina	850 mm
Podešavanje naslona	Manuelno
Podešavanje ugla sedišta	Manuelno
Podešavanje visine	Električno
Podešavanje oslonca za noge	Električno



WELLNESS CONCEPT

WELLNESS EXCLUSIVE


ELEKTROPODESIVI DVODELNI LEŽAJ

Šifra 226

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE

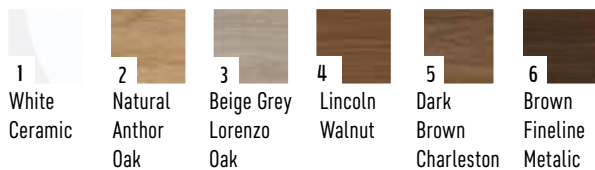

Tehničke karakteristike

Kategorija	Wellness
Primena	Wellness masaža
Masaža - Fitnes	Da
Pogon	2 motora
Daljinski upravljač	Da
Dužina	1920 mm
Širina	750 mm
Težina	100 kg
Minimalna visina	670 mm
Maksimalna visina	850 mm
Podešavanje naslona	Električno
Podešavanje ugla sedišta	Električno
Podešavanje visine	Električno
Oslonac za noge	Ne





WELLNESS CONCEPT

WELLNESS OMNIA SPA

Šifra 261

Wellness ležaj klasičnog dizajna i značajnih mogućnosti.

Baza za konstrukcijom od punog drveta, sa mogućnošću manuelnog podešavanja visine, prostorom za odlaganje peškira. Naslon za podizanje i spuštanje pod određenim uglovima, podesiv sektor za glavu i leđa, udoban i optimalno prilagođen terapeutu i klijentu, za opuštajuće, relaks masaže i tretmane.

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE



Tehničke karakteristike

Kategorija	Wellness
Primena	Wellness masaža
Masaža - Fitnes	Da
Pogon	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Dužina	2000 mm
Širina	760 mm
Težina	35 kg
Minimalna visina sedišta	700 mm
Maksimalna visina sedišta	800 mm
Podešavanje naslona	Manuelno
Podešavanje ugla sedišta	Ne
Podešavanje dubine sedišta	Ne
Oslonac za noge	Ne
Podešavanje visine	Manuelno





WELLNESS CONCEPT RELAX EXCLUSIVE

Šifra 219

Ležaljka sa fiksnim položajem sa posebno razvijenim zonama za spa opuštanje.

- > ležaljka posebno dizajnirana za zone spa opuštanja
- > fiksni položaj
- > površina od sintetičke kože jednostavna za negu

OPCIJE

- > Baza ležaljke drvena, zaštićena strukturnom zaštitom
- > Boje tapacira iz palete boja

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE



Tehničke karakteristike

Kategorija	Wellness
Primena	Relax tretmani
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Dužina	1900 mm
Širina	690 mm
Težina	30 kg
Minimalna visina sedišta	430 mm
Maksimalna visina sedišta	430 mm
Podešavanje naslona	Ne
Podešavanje ugla sedišta	Ne
Podešavanje dubine sedišta	Ne
Oslonac za noge	Ne
Podešavanje visine	Ne



WELLNESS CONCEPT

LEŽALJKA POOL CHAIRS

Šifra 9062

Urađen od drveta pažljivo biranog kvaliteta, sa visokom strukturnom zaštitom.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

- > LEŽALJKA POSEBNO DIZAJNIRANA ZA ZONE SPA OPUŠTANJA
- > PREDVIĐENE POZICIJE UZGLAVLJA LEŽAJA
- > POVRŠINA OD SINTETIČKE KOŽE JEDNOSTAVNA ZA NEGU

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE



Tehničke karakteristike

Kategorija	Wellness
Primena	Relax
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Dužina	2000 mm
Širina	680 mm
Težina	30 kg
Minimalna visina sedišta	460 mm
Maksimalna visina sedišta	460 mm
Podešavanje naslona	Manuelno
Podešavanje ugla sedišta	Ne
Podešavanje dubine sedišta	Ne
Oslonac za noge	Ne
Podešavanje visine	Ne



WELLNESS CONCEPT

WELLNESS STOČIĆ DRVENI

Šifra 9058

BOJA KONSTRUKCIJE

1	2	3	4	5	6	7
Prirodna Bukva	Svetli Lešnik	Braon Orah	Hrast Na Bukvi	Tamno Sivo	Srednji Orah	Svetli Wenge

KARAKTERISTIKE

- > konstrukcija stočića drvena, zaštićena strukturnom zaštitom
- > boja konstrukcije iz palete boja

Tehničke karakteristike

Dužina	400 mm
Širina	500 mm
Visina	420 mm
Težina	3 kg



LEŽAJEVI

MULTIEXCLUSIVE LEŽAJ

ELEKTROPODESIVI LEŽAJ SA DVA MOTORA

Šifra 320

- > Potpuna udobnost za tretmane lica ili kombinovane tretmane lica-manikira i pedikira
- > Visoka stabilnost sa postojanošću čak i u vodoravnom položaju
- > Nasloni za ruke su postavljeni da se mogu podići i staviti na 180 stepeni, za bočni pristup klijentu
- > Nasloni za spuštanje i podizanje glave, leđa, nogu i stopala
- > Komfornost sa električnim podešavanjem dela za leđa, glavu i visine
- > Pravo opuštajuće i relaksirajuće iskustvo za klijenta

PALETA EKO KOŽE

BOJA	KONSTRUKCIJE
1 Black	2 Brown
3 Cream	4 Grey
5 Java	6 Violet
7 White	8 Wine
9 Ash	10 Beige
White	



Tehničke karakteristike:

Kategorija	Kozmetički tretmani
Primena	Kozmetički tretmani lica, kombinovani tretmani
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	2 motora
Daljinski upravljač	Da
Dužina	1850 mm
Širina bez rukonaslona	590 mm
Širina sa rukonaslonima	850 mm
Težina	70 kg
Minimalna visina sedišta	560 mm
Maksimalna visina sedišta	800 mm
Podešavanje naslona	Električno
Oslonac za noge	Da (manuelno)
Podešavanje visine	Električno
Dimenzije rukonaslona	510x50x70 mm



LEŽAJEVI

MULTIEXCLUSIVE LEŽAJ

ELEKTROPODESIVI LEŽAJ SA TRI MOTORA

Šifra 321

- > Nasloni za ruke su postavljeni da se mogu podići i staviti na 180 stepeni, za bočni pristup klijentu
- > Nasloni za spuštanje i podizanje glave, leđa, nogu i stopala
- > Komfornost sa električnim podešavanjem dela za leđa, dela za glavu i dela za noge (3 motora)
- > Pravo opuštajuće i relaksirajuće iskustvo za klijenta

Tehničke karakteristike

Kategorija	Kozmetički tretmani
Primena	Kozmetički tretmani lica, kombinovani tretmani
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	3 motora
Daljinski upravljač	Da
Dužina	1850 mm
Širina bez rukonaslona	590 mm
Širina sa rukonaslonima	850 mm
Težina	80 kg
Minimalna visina sedišta	560 mm
Maksimalna visina sedišta	800 mm
Podešavanje naslona	Električno
Podešavanje visine	Električno
Podešavanje dela za noge	Električno
Dimenzije rukonaslona	510x50x70 mm

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE





LEŽAJEVI

LEŽAJ DVODELNI ELEKTROPODESIVI

ELEKTROPODESIVI LEŽAJ SA JEDNIM MOTOROM

Šifra 210

Ležaj sa elektromotornom regulacijom visine, pruža olakšan rad terapeutu. Podešavanje odgovarajuće pozicije umanjuje fizički napor i posao čini prijatnim.

Optimalno podešena konstrukcija omogućava udobnost klijentu uz istovremeno prilagođen pristup terapeuta za odgovarajuće tretmane.

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE



Tehničke karakteristike

Kategorija	Kozmetički tretmani
Primena	Kozmetički tretmani tela
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	1 motor
Daljinski upravljač	Da
Dužina	1900 mm
Širina	750 mm
Težina	60 kg
Minimalna visina sedišta	670 mm
Maksimalna visina sedišta	850 mm
Podešavanje naslona	Manuelno
Oslonac za noge	Ne
Podešavanje visine	Električno



LEŽAJEVI

LEŽAJ TRODELNI 4D

MULTIFUNKCIONALNI LEŽAJ

Šifra 216

Ova funkcionalna verzija ležaja sa pristupačnom bazom, dizajniran da pruži izuzetan prilaz kozmetičaru. Osnova je stabilne, oble strukture, ergonomski sedalni deo, podesivi sektori za glavu i noge. Namenjen je za tretmane lica

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE



Tehničke karakteristike

Kategorija	Kozmetički tretmani
Primena	Kozmetički tretmani lica
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Dužina	1900 mm
Širina	530 mm
Širina sa rukonaslonima	720 mm
Težina	40 kg
Minimalna visina sedišta	670 mm
Maksimalna visina sedišta	670 mm
Podešavanje naslona	Manuelno
Oslonac za noge	Manuelno
Podešavanje visine	Ne





LEŽAJEVI

LEŽAJ TRODELNI 4D

SA RAZDELJENIM NOGAMA

Šifra 284

Funkcionalna verzija ležaja sa pristupačnom osnovom. Dizajniran je da pruži izuzetan prilaz kozmetičaru.

Osnova je stabilne, oble strukture, ergonomski sedalni deo, podesivi sektori za glavu i noge.

Namenjen je za tretmane lica.

PALETA EKO KOŽE

1	2	3	4	5	BOJA KONSTRUKCIJE
Black	Brown	Cream	Grey	Java	
6	7	8	9	10	White
Violet	White	Wine	Ash	Beige	



Tehničke karakteristike

Kategorija	Kozmetički tretmani
Primena	Kozmetički tretmani lica
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Dužina	1900 mm
Širina	530 mm
Širina sa rukonaslonima	720 mm
Težina	40 kg
Minimalna visina sedišta	670 mm
Maksimalna visina sedišta	670 mm
Podešavanje naslona	Manuelno
Oslonac za noge	Manuelno
Podešavanje visine	Ne



LEŽAJEVI

LEŽAJ DVODELNI 4D

MULTIFUNKCIONALNI LEŽAJ

Šifra 215

KARAKTERISTIKE

- > Ležaj konstruisan za tretmane tela i lica
- > Dostupan u kataloškim bojama
- > Površina od sintetičke kože jednostavna za negu

OPCIJE

- > Metalna konstrukcija u beloj boji
- > Tapaciranje u boji iz tabelarnog prikaza

PALETA EKO KOŽE



BOJA KONSTRUKCIJE



Tehničke karakteristike

Kategorija	Kozmetički tretmani
Primena	Epilacija, depilacija, tretmani lica
Masaža - Fitnes	Ne
Pogon	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Dužina	2050 mm
Širina	670 mm
Težina	50 kg
Minimalna visina sedišta	790 mm
Maksimalna visina sedišta	790 mm
Podešavanje naslona	Manuelno
Oslonac za noge	Ne
Podešavanje visine	Ne

STOLICE ZA KOZMETIČARE



- Hromirano postolje, stabilne konstrukcije
- Anatomske naslon sa potporom za leđa
- Podesiva visina
- Udobnost i komforost sedalnog dela
- Dimenzije: 460x460x700-800 mm
- Težina: 8 kg

STOLICE

STOLICA K 10

ERGONOMIČNA STOLICA
VISOKOG KVALITETA



Šifra 521

- Hromirano postolje, stabilne konstrukcije
- Anatomske naslon sa potporom za leđa
- Podesiva visina
- Udobnost i komforost sedalnog dela
- Dimenzije: 460x460x700-800 mm
- Težina: 8 kg

STOLICE

STOLICA K 11



Šifra 249

- Hromirana konstrukcija
- Podesiva visina
- Udobnost i komforost sedalnog dela
- Dimenzije: 460x460x700-800 mm
- Težina: 7 kg

STOLICE

STOLICA K 3



Šifra 247

- > Konstrukcija: metal plastificiran
- > Police: oplemenjena iverica
- > Dimenzije: 370x520x840 mm
- > Težina: 10kg

POLICE

POLICA ZA MEZO APARATE



Šifra 9085

- > Konstrukcija: metal plastificiran
- > Police: oplemenjena iverica
- > Dimenzije: 500x640x840 mm
- > Težina: 15kg

POLICE

POLICA ZA IPL APARATE



Šifra 9068

- > Konstrukcija: metalna
- > Dužina: 360 mm
- > Širina: 500 mm
- > Visina: 840 mm
- > Težina: 20 kg

POLICE

STALAK ZA RF FACE & BODY



Šifra 9880/1

- > Konstrukcija: metalna
- > Visina: 940 mm
- > Površina gornje ploče: 340x495 mm
- > Težina: 20 kg

POLICE

STALAK ZA BODY MASTER



Šifra 8086/1

- > Konstrukcija: metalna
- > Dužina: 320 mm
- > Širina: 580 mm
- > Visina: 780 mm
- > Težina: 15 kg

POLICE

METALNA POLICA 3D

- > Konstrukcija: metalna
- > Dužina: 460 mm
- > Širina: 560 mm
- > Visina: 790 mm
- > Težina: 20 kg



Šifra 250

METALNA POLICA 5D

- > Unutrašnje dimenzije fioka: 450x245x75 mm
- > Idealna je za pedikir i manikir opremu
- > Mobilna, sa točkićima
- > Dimenzije: 640x360x860 mm

POLICE

POLICA SA FIOKOM



Šifra 8086/1

- > Naziv aparata: DEPY LADY 9L
- > Šifra proizvoda: 9010
- > Napajanje: 220-230 V AC; 50/60 Hz
- > Kapacitet: 9 L (2x4,5 L)
- > Snaga: 1400 W (2x700 W)
- > Osigurač: T-6,3 A
- > Termostat od 0-110°C
- > Kućište aparata: metalno
- > Materijal posuda: prohrom
- > Dimenzije aparata bez stalka (dxšxv): 510x260x340 mm
- > Visina sa stalkom: 570-820 mm
- > Težina aparata bez stalka: 9 kg
- > Težina sa stalkom: 15 kg

TOPILICE

DEPY LADY 9L

sa i bez stalka

- > Naziv aparata: DEPY LADY 5L
- > Šifra proizvoda: 9011
- > Napajanje: 220-240 V AC; 50/60 Hz
- > Kapacitet: 5 L
- > Snaga: 700 W
- > Osigurač: T-6,3A
- > Termostat od 0-110°C
- > Kućište aparata: metalno
- > Materijal posuda: prohrom
- > Dimenzije aparata sa stalkom (dxšxv): 550x550x820 mm
- > Težina aparata sa stalkom: 10 kg

TOPILICE

DEPY LADY 5L

- > Napajanje: 220-240 V AC; 50/60 Hz
- > Snaga grejača: 100 W
- > Osigurač: T-1 A
- > Broj mesta za patrone: 3
- > Termostat od 0-100°C
- > Kućište aparata: metalno
- > Dimenzije aparata (dxšxv): 240x180x190 mm
- > Težina aparata: 2 kg

TOPILICE

DEPY LADY TH8

Profesionalna topilica za toplu depilaciju

- > Posude od prohroma visokog kvaliteta
- > Kontrola temperature sa programirajućim termostatom
- > Odvojena regulacija temperature posuda
- > Filter mrežica za prečišćavanje voska



Šifra bez stalka 9010/1

Šifra sa stalkom 9010

Aparat za toplu depilaciju

- > Kontrola temperature putem termostata,
- > Kapacitet posude 5 L
- > Podesiv po visini stalak topilice



Šifra 9011

- > Namenjena za depilaciju hladnim voskom
- > Odgovara svim veličinama patronama
- > Postojana regulacija temperature programskim termostatom
- > Istovremeno zagrevanje različitih veličina patrona
- > Nezavisan rad posuda
- > Broj patrona: 3



Šifra 9013

- > Napajanje: 220-240 V AC; 50/60 Hz
- > Snaga grejača: 200 W (2x100 W)
- > Osigurač: T-1 A x 2kom
- > Broj mesta za patrone: 6
- > Mogućnost podešavanja temperature 0-100°C
- > Kućište aparata: metalno
- > Dimenzije aparata (dxšxv): 240x280x190 mm
- > Težina aparata: 3,5 kg

TOPILICE

DEPY LADY TH16

- > Dizajnirana da ispuni zahteve dugotrajne profesionalne upotrebe
- > Namenjena za depilaciju hladnim voskom
- > Odgovara svim veličinama patronama
- > Postojana regulacija temperature programskim termostatom
- > Istovremeno zagrevanje različitih veličina patrona
- > Nezavisan rad posuda
- > Broj patrona: 6



Šifra 9014

- > Napajanje: 220-230 V AC; 50/60 Hz
- > Kapacitet: 500 g
- > Snaga grejača: 300 W
- > Materijal posude: prohrom
- > Termostat od 0-120°C
- > Dimenzije aparata (dxšxv): 150x170x140 mm
- > Težina aparata: 1,5 kg

TOPILICE

DEPY LADY 21

- > Dizajnirana da ispuni zahteve za profesionalnu upotrebu
- > Pogodna za depilaciju manjih površina na licu i telu
- > Praktična za konzerve voska od 500 i 800g
- > Kontrola temperature programskim termostatom



Šifra 9012

- > Napajanje: 220-230 V AC; 50/60 Hz
- > Kapacitet: 800 g
- > Snaga grejača: 150 W
- > Termostat od 0-150°C
- > Dimenzije aparata (dxšxv): 160x160x155 mm
- > Težina aparata: 1 kg

TOPILICE

DEPY LIBERTY 800 ml



Šifra 6432



STERILIZATORI SUVI STERILIZATOR

Šifra 9032

APARAT ZA SUVU STERILIZACIJU SA FORSIRANIM MEŠANJEM VRELOG VAZDUHA

Suvi sterilizator namenjen je za sterilizaciju metalnog i staklenog pribora na temperaturi do 250°C.

Specijalna perforirana kaseta sa ručicama za odlaganje pribora.

Automatska kontrola temperature određuje se programskim termostatima.

Idealan za sterilizaciju metalnog i staklenog pribora.

Tehničke karakteristike

Režim rada: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Snaga: 300 W

Kućište i kaseta od prohrmskog lima

Mikroprocesorska kontrola temperature

Dimenzije aparata (dxšxv): 325x195x200 mm

Dimenzije kasete za sterilizaciju (dxšxv): 240x110x30 mm

Težina aparata: 4,2 kg

PRATEĆA OPREMA

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
6915		MULTIPLE EPIL H8 - APARAT ZA LASERSKU EPILACIJU SA DVE SONDE		
3378		IPL ručica sa filterima	kom	1
3341		SHR ručica	kom	1
309		Naočare za kozmetičara	kom	1
3382		Naočare za klijenta	kom	1
6914		MULTIPLE EPIL PORTABL LIGHT - APARAT ZA LASERSKU EPILACIJU SA JEDNOM SONDOM		
3378		IPL ručica sa filterima	kom	1
309		Naočare za kozmetičara	kom	1
3382		Naočare za klijenta	kom	1
6814		3XD FUSION - DIODNI LASER SA 3 TALASNE DUŽINE 755+808+1064nm		
3197		Sonda za diodni laser sa 3 talasne dužine 12x18	kom	1
309		Naočare za kozmetičara	kom	1
3382		Naočare za klijenta	kom	1
6816		3XC ALFA PORTABL - DIODNI LASER PORTABL SA 3 TALASNE DUŽINE 755+808+1064nm		
3198		Sonda za diodni laser sa 3 talasne dužine 12x12	kom	1
309		Naočare za kozmetičara	kom	1
3382		Naočare za klijenta	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
6813		EXTREME LIGHT - DIODNI LASER 808nm		
3199		Sonda za diodni laser 808nm 12x12	kom	1
309		Naočare za kozmetičara	kom	1
3382		Naočare za klijenta	kom	1
6825		CARBON LIGHT 5XD - ND:YAG LASER		
3203		Sonda ND:Yag	kom	1
3200		Nastavak 1064nm	kom	1
3201		Nastavak 532nm	kom	1
3202		Nastavak za podmlađivanje	kom	1
3382		Naočare za kozmetičara	kom	1
309		Naočare za klijenta	kom	1
6820		CRYSTAL LASER PORTABL LIGHT - ND:Yag Laser		
3204		Sonda ND:Yag	kom	1
3200		Nastavak 1064nm	kom	1
3201		Nastavak 532nm	kom	1
3202		Nastavak za podmlađivanje	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
3382		Naočare za kozmetičara	kom	1
309		Naočare za klijenta	kom	1
4045		EPILAX RADIO WAVE - RADIOTALASNO UKLANJANJE DLAČICA		
268		Epilax ručica igla	kom	1
267		Epilax ručica pinceta	kom	1
9050		LIPOSLIM SYSTEM - ULTRAZVUČNA KAVITACIJA, RADIOTALASNI LIFTING, VAKUUM		
8090		RF sonda fi 60 multipolar	kom	1
9063		Sonda za kavitaciju	kom	1
5053/1		Vakuum ručica sa kuglicama	kom	1
8111		ULTRA CONTOUR TOUCH - ULTRAZVUČNA LIPOLIZA		
8108/1		Sonda Ultra Contour	kom	8
2478		Gumeno grafitna elektroda sa kopčom	kom	16
8108/3		Prostirka za Ultra Contour	kom	1
9075		Steznici za elektrostimulaciju	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
9827		MEZO BODY SYSTEM - ELEKTROSTIMULACIJA MIŠIĆA, ULTRAZVUK, VAKUUM, MEZOPORACIJA		
9088		Sonda mezo/RF fi 50	kom	1
5053/1		Vakuum ručica sa kuglicama	kom	1
0019		Sonda za ultrazvuk veća	kom	1
8089/1		Celos kablovi	kom	4
8089/3		Sunderaste navlake za celos	kom	16
0872		Gumeno grafitne elektrode fi50	kom	16
9075		Steznici za elektrostimulaciju	kom	1
9057		RWT POWER TECHNOLOGY - SHOCKWAVE TRETMAN		
0151		RWT ručica	kom	1
0157		Transmitter za RWT ručicu fi 15mm	kom	1
0156		Transmitter za RWT ručicu fi 9mm (opcija)	kom	1
0152		Transmitter za RWT ručicu fi 38,5mm (opcija)	kom	1
0158		Poklopac za RWT ručicu	kom	1
6888		BEAUTY AIR MASSAGER - MASAŽA VAZDUŠNIM PRITISKOM		
6954		Odelo za Beauty Air Massager	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
6459		TERMO ČEBE - INFRARED ZAGREVANJE TELA, EFEKAT SAUNE		
6760		Prostirka za termo čebe	kom	1
5057		CAVITE EXCLUSIVE - ULTRAZVUČNA KAVITACIJA		
9063		Sonda za kavitaciju	kom	1
9091		CAVITE STAR - ULTRAZVUČNA KAVITACIJA		
9063		Sonda za kavitaciju	kom	1
5059		CAVITE PERFECT PORTABL - ULTRAZVUČNA KAVITACIJA		
9063		Sonda za kavitaciju	kom	1
8113		RF ENERGY - RF LIFTING ZA TRETMANE TELA, MULTIPOLAR SONDA		
8090		RF sonda fi 60 multipolar	kom	1
8091		RF sonda fi 30 multipolar	kom	1
5058		RF DYNAMIC - RADIOTALASNI LIFTING LICA I TELA		
8090		RF sonda fi 60 multipolar	kom	1
8091		RF sonda fi 30 multipolar	kom	1
9880		RF FACE & BODY TOUCH		
8090		RF sonda fi 60 multipolar	kom	1
8091		RF sonda fi 30 multipolar	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
8086		BODY MASTER - ELEKTROSTIMULACIJA MIŠIĆA		
8089/1		Celos kablovi	kom	6
8089/3		Sunderaste navlake za celos	kom	24
0812		Gumeno grafitne elektrode fi50	kom	24
9075		Steznici za elektrostimulaciju	kom	1
8087		CELOS 12C - ELEKTROSTIMULACIJA MIŠIĆA		
8089/1		Celos kablovi	kom	6
8089/3		Sunderaste navlake za celos	kom	24
0812		Gumeno grafitne elektrode fi50	kom	24
9075		Steznici za elektrostimulaciju	kom	1
8103		BIOLASER DS 100MW FACE&BODY		
8103R		Biolaser ručica 100mW	kom	1
5051		ULTRASOUND DS FACE&BODY		
0019		Sonda za ultrazvuk veća	kom	1
2073		Sonda za ultrazvuk mala	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
9025		VACUUM FACE&BODY		
5053/1		Vakuum ručica sa kuglicama	kom	1
0525		Vakuum ručica mala za lice	kom	1
2384		Set nastavaka za mikrodermoabraziju	kom	1
9825		DERMO OXY		
0548		Aplikator za kiseonik	kom	1
3560		Air Brush pištolj	kom	2
3881		Maska za kiseonik	kom	1
9024		FACE CREATOR		
9026		Sonda za mezoporaciju fi 30	kom	1
9095		Sonda RF fi 30	kom	1
8103R		Biolaser ručica 100mW	kom	1
2028/1		Darsonval ručica (za visoku frekvenciju)	kom	1
0730		Staklena elektroda za darsonval (pečurka)	kom	1
0128		Ultrazvučna špatula	kom	1
0525		Vakuum ručica mala za lice	kom	1
2073		Sonda za ultrazvuk mala	kom	1
2384		Set nastavaka za mikrodermoabraziju	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
9096		MEZO RF LIFT - MEZOPORACIJA I RADIOTALASNI LIFTING		
9026		Sonda za mezoporaciju fi 30	kom	1
9095		Sonda RF fi 30	kom	1
9081		MESO SKIN EP - MEZOPORACIJA		
9026		Sonda za mezoporaciju fi 30	kom	1
9828		FACE LIFT MASK		
2479		Elektrode za elektrostimulaciju mišića	kom	6
5058		RF DYNAMIC - RADIOTALASNI LIFTING LICA I TELA		
8090		RF sonda fi 60 multipolar	kom	1
8091		RF sonda fi 30 multipolar	kom	1
4052		DEEP CLEAN - DIJAMANTSKA MIKRODERMOABRAZIJA		
2384		Set nastavaka za mikrodermoabraziju	kom	1
9025		VACUUM FACE&BODY		
5053/1		Vakuum ručica sa kuglicama	kom	1
0525		Vakuum ručica mala za lice	kom	1
2384		Set nastavaka za mikrodermoabraziju	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
9089		ULTRAPEEL & PDT LED - ULTRAZVUČNI PILING I PDT LED		
0128		Ultrazvučna špatula	kom	1
9094		Sonda za PDT LED	kom	1
8104		ULTRASONIC SKIN SYSTEM		
0128		Ultrazvučna špatula	kom	1
5051		ULTRASOUND DS FACE & BODY		
0019		Sonda za ultrazvuk veća	kom	1
2073		Sonda za ultrazvuk mala	kom	1
4051		LIFTING M-BEAUTY		
4051RL		Lifting ručice komplet	kom	1
8103		BIOLASER DS 100MW FACE & BODY		
8103R		Biolaser ručica 100mW	kom	1
6444		VAPOZON FM-601		
3050		Posuda za vapozone plastična fi11,5	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
2028		DARSONVAL AS - VISOKA FREKVENCIJA		
2028/1		Darsonval ručica (za visoku frekvenciju)	kom	1
0730		Staklena elektroda za darsonval (pečurka)	kom	1
2027		JONOS-DARSONVAL - JONTOFOREZA I VISOKA FREKVENCIJA		
274		Ručica za jontoforezu	kom	1
9076		Pacijent kabl za jonos	kom	1
0883		Valjak za jonos	kom	1
1002		Štipaljka za jonos	kom	1
0551		Negativna elektroda	kom	1
2028/1		Darsonval ručica (za visoku frekvenciju)	kom	1
0730		Staklena elektroda za darsonval (pečurka)	kom	1
2025		JONOS AS10 - JONTOFOREZA		
274		Ručica za jontoforezu	kom	1
9076		Pacijent kabl za jonos	kom	1
0883		Valjak za jonos	kom	1
1002		Štipaljka za jonos	kom	1
0551		Negativna elektroda	kom	1

Šifra		Naziv proizvoda	JM	Količina
2025/1		JONOS AS 30		
0788		Gumeno grafitne elektrode za jonos	kom	2
8089/5		Sunderaste navlake za jonos	kom	2
9076		Pacijent kabl za jonos	kom	1
		WELLNESS LEŽAJEVI I OPREMA		
1755		Motor za električni ležaj veći 150mm	kom	1
2440		Motor za električni ležaj manji 80mm	kom	1
2162		Elektronika za električni ležaj	kom	1
2441		Daljinska komanda za električni ležaj	kom	1

Kontakt podaci:



VECOM BEAUTY SYSTEM DOO

Trg kralja Aleksandra 2/4
18000 Niš
Srbija



+381 18 4296-006
+381 18 4296-004
+381 63 7719-787



office@vecom.rs
www.vecom.rs



www.vecom.rs