

HYDRACLEAR 6D

NOVI
PROIZVOD



Šifra 6028

HIDRODERMOABRAZIJA

tretman koji spaja piling lica, čišćenje i hidrataciju



ČIŠĆENJE



HIDRODERMOABRAZIJA



HIDRATACIJA



Hidradermoabrazija je napredni nivo nege lica baziran na vodi:

- poboljšava teksturu kože i ujednačava ten
- ubrzava obnavljanje kože lica
- smanjuje proširene pore
- koža se blago zateže i hidrira


Faze tretmana:

1. Čišćenje kože
2. Piling- hydradermoabrazija
3. Ekstrakcija (rastvaranje preparata)
4. Hidratacija
5. Limfna drenaža i stimulacija kolagena
6. Plasma sterilizacija

KORAK 1 - čišćenje:

**Uklanja nečistoće iz pora
bezbolnim nežnim usisavanjem**

Putem silikonske sonde koja ima mogućnost rotacije za 360 stepeni i putem snažnog vakuma, obavlja se proces čišćenja kože, putem koga se uvlače sve nečistoće sa površine lica. Za čišćenje se koristi rastvor Beta hidroksi kiselina (BHA) i antioksidanasi koji prolaze u dublje slojeve i odstranjuju višak sebuma koji je zarobljen.

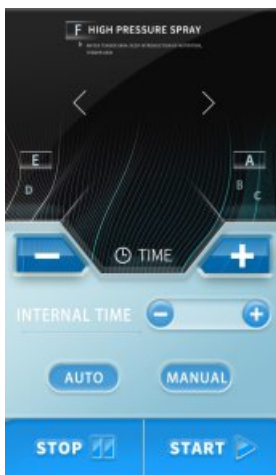

Sa podešenim interfejsom, moć uvlačenja tkiva je optimalna, čime je omogućeno dubinsko čišćenje bez povređivanja kože.

Sa negativnim pritiskom do 92KPa, u kombinaciji sa toplim i hladnim podešivim režimom, voda sa jonima vodonika sa koncentracijom do 1480ppb može se trenutno koristiti za čišćenje spoljašnjeg sloja kože i dublje pora - jedinstvenom rotacijom, ujedno povećavajući elastičnost kože.

KORAK 2 - piling hidrodermoabrazija

Dubinski čisti i vrši nežni piling kako bi otkrio novi sloj kože.

Pomoću određenih rastvora antioksidanasa (retinoli, polifenoli), obavlja se nežan piling preko namenske sonde, čime se otvaraju pore i uklanjaju mrtve ćelije kože. Ovi preparati u vidu bustera natapaju i čiste kožu, omogućavajući razlaganje nečistoća. Istovremeno omogućavaju omekšavanje kaveroznih vlakana i ujednačeno skidanje izumrlih ćelija.

Kako se ovim tretmanom vodi računa o zdravlju kože, tako se koriste prirodni preparati poput hijaluronske kiseline, vitamina E, vitamina C, beta karotena.

KORAK 3 - hidratacija kože

Regeneriše površinu kože intenzivnim hidratantnim i hranljivim, personalizovanim sastojcima

Dubinska hidratacija ima za cilj da zdravo nahrani kožu koja dobija na blistavosti, svežini i lepoti. Mlazom pod visokim pritiskom ubrizgavamo serum obogaćen hijaluronskom kiselinom, antioksidantima i peptidima koji pružaju visokokvalitetnu hidrataciju i zaštitu kože.

Postupak delovanja pod visokim pritiskom od 800KPA omogućava da se brzo usmeri delovanje bustera direktno u srednji sloj kože, tako da se visoke koncentracije aktivnih proizvoda lako apsorbuju i stimulišu regeneraciju proteina.

DEZINFEKCIJA PLAZMOM

Korišćenjem visokofrekventnog napona elektrolizuje se kiseonik iz vazduha kako bi proizveo ozon. Ovim putem se uništavaju bakterije, virusi i alergeni za kratko vreme, sprečavaju upale, a efekat delovanja na upalne procese je očigledan.

Duboka dezinfekcija, smanjuje upalne procese i akne




KORAK 4

Efekat zatezanja
(sonda za lifting sa radiofrekvencijom)

Kotrljajuće elektrode simuliraju akciju masaže, a bipolarni RF radio frekvencijski Y oblik je pogodan za stimulaciju nove reorganizacije potkožnog kolagena. Ciljajući na opuštene kesice ispod očiju, bore u uglovima očiju i konture brade, iznutra ka spolja, odozgo prema dole, zateže lice.

Duboko aktivira kolagen - Podiže i zateže kožu, poboljšava opuštene konture lica, uklanja bore i smanjuje znake starenja

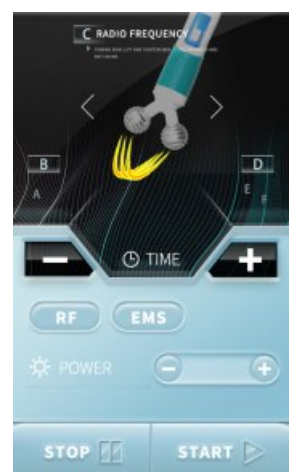

KORAK 5

Smanjuje vidljivost pora (sonda sa hlađenjem)

Fizičko hlađenje, temperatura koja je 0-5 stepeni Celzijusa, smiruje kožu i skuplja kapilare, smanjuje pore, otklanja crvenilo i otok i čini kožu lepšom.

KORAK 6

Aktivirajte ćelije Ultrazvukom (sonda za ultrazvuk)

Ultrazvuk aktivira ćelije kože na frekvenciji od 1 do 3 miliona vibracija u minuti, promoviše hranljivost i apsorpciju ćelija, čineći da procenat apsorpcije ćelija dostigne preko 90%.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv aparata	HydraClear 6D
Šifra aparata	6028
Snaga	110V/50Hz~240V/50Hz
Tehnologija	Neinvazivni mlaz visokog pritiska
Ulazna snaga	320≤W
Podesivi pritisak	300KPa (3.0kgf/cm ²)~600KPa (6.0kgf/cm ²)
Intervalni režim	0.3~2 sekunde ručno/automatsko
Dubina	0.5mm~3mm
Podesiva doza	5min/10ml~7min/10ml
Ultrazvuk	Frekvenca 3M kondenzator 5600±15%PF
Temperatura	25°C~65°C
Čišćenje ručice	Negativan pritisak ≈92KPa
Bruto težina	17 kg
Dimenzije	Dužina, širina i visina: 550*380*420 mm



VECOM BEAUTY SYSTEM DOO

Trg kralja Aleksandra 2/4
18000 Niš
Srbija



+381 18 4296-004
+381 63 7719-787



office@vecom.rs
www.vecom.rs